

耳かけ型補聴器

フォナック スカイ ルミティ

**Phonak Sky™ L**

フォナック ナイダー ルミティ

**Phonak Naída™ L**

取扱説明書



# はじめに

---

このたびはフォナック補聴器をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用いたします。



ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく  
ご使用ください。

また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。


# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示がある項目は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示がある項目は、「損害を負う可能性、または物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容を次のように表示し、説明しています。

 <b>禁止</b>	この表示がある項目はしてはいけない「禁止」の内容です。
---	-----------------------------

## ■ 安全にお使いいただくために

自分で操作ができない方、自分で意思表示ができない方が使用される場合は、必ず周りの方が気をつけて、一人で使わせないでください。

(フォナック ナイードルミティ)

36か月未満の乳幼児には使用しないでください。

(フォナック スカイルミティ)

36か月未満の乳幼児へは、チャイルドロック付き電池ホルダーおよびチャイルドロック付きフック仕様のスカイ L-UPタイプ、または電池ホルダーの無いスカイ L-PRタイプをチャイルドロック付きフック仕様でご使用ください。

# ご使用にあたって

## ■ 本体、電池の取り扱いについて

### 禁止

- 下記の項目に該当する場合は、補聴器の使用を中止し耳鼻咽喉科医師（補聴器相談医）の診察を受けてください。
  - 耳の治療中の方、外耳道に痛みまたはかゆみがある場合
  - 最近3ヶ月以内に耳漏があった場合
  - 最近2ヶ月以内に聴力が低下した場合
  - 最近1ヶ月以内に急に耳鳴りが大きくなった場合
  - 耳あかが多くたまっている場合
  - 耳の手術を受けたことがある場合
  - 聴力測定の結果、平均聴力の左右差が25 dB以上ある場合
  - 聴力測定の結果、500、1,000、2,000 Hzの聴力に20 dB以上の気骨導差がある場合
- 音量を大きくしすぎないでください。
- 騒がしいところでは音量を小さめにするか、長時間使用しないようにしてください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないようにしてください。
- 分解、改造をしないでください。感電、火災、故障、けがなどの原因になります。
- レントゲン撮影、CTスキャンなどの画像診断器で使用する放射線（X線など）の直接照射は補聴器に悪影響を与える場合があります。これらの機器を用いた撮影を行う前には医師に補聴器を外すかどうかをお尋ねください。  
またMRIスキャンは強い磁力を用いますので、MRI室に入る前には必ずお外してください。

- 高気圧酸素治療のときは圧力により発火や故障の恐れがあるため、治療室内に持ち込まないでください。
- 過度の湿気や高温な場所は避けてください。特に夏場は、窓や車のフロントガラスの近くには置かないようにしてください。
- 補聴器は完全防水ではありません。補聴器の内部に水が入ると故障する恐れがありますので、水に濡らさないでください。（例：お風呂に入るとき）  
また、強い水流を当てたり、水中に沈めたりしないでください。
- 電池は火中に投げ入れないでください。
- 補聴器本体、電池単体および付属品（耳せん等）を子どもの手の届くところやペットのそばに保管しないでください。万が一、誤って飲み込んでしまった場合は、ただちに医師にご相談ください。電池の誤飲によって化学やけどを引き起こす可能性があります。
- 変形したり傷がある電池は使用しないでください。

## 警告

- 通信機能が搭載されている器種におきましては、心臓ペースメーカー（およびICD）の動作に影響を及ぼす場合があります。心臓ペースメーカー（およびICD）を装着されている方は、補聴器を埋め込み部分から少なくとも15cm以上離してご使用ください。
- アンテナケーブルや外部アンテナなどのポータブルRF通信機器（携帯電話を除く）は、メーカーが指定したケーブルを含め、補聴器から30cm以内で使用しないでください。本装置の性能が低下する可能性があります。

## 注意

- 指向性マイクロホンが作動している場合は、主に背後から来る音を抑えます。そのため、装用者の背後に近づく車の音や背後で鳴るクラクション（警告音）が聞こえにくいことがあります。
- 無線通信機能が作動している場所や、IHクッキングヒーター・電子レンジ・超音波洗浄機や自動ドアなどを使用している場所では、雑音が入ることがあります。これは補聴器の故障ではありません。補聴器を取り外すか、強力な電波（電磁波）を発する機器に近付かないようにしてください。
- 小型家電リサイクル法により、不要になった補聴器は各自治体指定の方法によりリサイクルをしてください。尚、回収方法に関しては、各自治体のHP等にてご確認ください。
- 空港の保安検査場（セキュリティゲート）を通過する際に補聴器を取り外す必要はありません。補聴器が反応してしまった場合は、補聴器を装着していることを係員に伝えれば対応してもらえます。不安が残るようであれば、通過する前に係員に装着していることをお伝えください。
- 汗、湿気、皮脂、耳あか、整髪料などが補聴器内部に入ると故障する恐れがありますので、ご使用後はお手入れを行ってください。
- 補聴器のハウジングケースに劣化や破損があると防水性能を維持することができません。そのような症状が見られる場合には、お買い求めいただいた販売店へご連絡ください。
- 補聴器を使用する前、あるいは使用中に次の症状がある場合には、使用を中止して耳鼻咽喉科医師の診察を受けてください。
  - 耳漏が生じたとき。
  - 耳の治療が必要になったとき。
  - 耳の聞こえが急に悪くなったと思えるとき。
  - 耳の皮膚が赤くなったり、かゆみ、湿疹が生じたとき。

- 使用すると頭痛や疲れが生じるとき。
  - 補聴器の外観、音質、音量等に異常を感じたとき。
  - めまいが生じたとき。
  - 部品が耳中に残留したとき。
- 補聴器に異常が見られた場合は、お買い求めいただいた販売店へお持ち込みいただき一度ご相談ください。

#### (空気電池タイプの場合)

- 補聴器を使用しない場合は電池を取り出してください。そして湿気を取り除くために電池ホルダーを開けたままの状態乾燥ケースの中に保管してください。
- ご使用になるまでは電池のシールをはがさないでください。ご使用の際にシールをはがし、30秒ほど待ってからご使用ください。
- 使用済みの電池は、各自治体指定の方法により処分をしてください。

#### (充電タイプの場合)

- 充電補聴器の過放電をさけるため、補聴器を使用しない場合でも、補聴器を電源オフにし、満充電にした上で、少なくとも6か月に一度は補聴器を充電してください。充電池が過放電状態になると、充電池が劣化することで充電ができなくなり、充電池を交換することになります。同様の理由により、パワーパックに関しては少なくとも3か月に一度は満充電にしてください。

#### (フィッティングを行う専門家の方へ)

- 132dB SPLを超える音圧レベルは、残存聴力を害する恐れがあるのでご注意ください。
- 安全規格に適合していない機器に補聴器を接続してフィッティングを行わないでください。

## ■ リチウムイオン電池の取り扱いについて (充電タイプのみ)

### 警告

- リチウムイオン電池の交換はメーカーで行う必要があります。リチウムイオン電池を分解しないでください。
- リチウムイオン電池は補聴器から取り外せません。誤った使い方をすると破裂する危険があります。
- 万一リチウムイオン電池が破裂した場合、速やかに可燃物から遠ざけてください。

### 注意

- 冬場や夏場など周囲温度が5℃から40℃の範囲を超える場合、補聴器が正しく機能しない、または充電できないことがあります。周囲温度が規定範囲に戻っても症状が改善されない場合は、「再起動する (充電タイプ)」(52ページ) を実行してください。
- 補聴器の性能が著しく低下している時は、お買い求めの販売店へ修理に出してください。

## ■ 充電用ACアダプタの取り扱いについて (充電タイプのみ)

### 警告

- 充電の際には専用のACアダプタを使用してください。
- 濡れた手でACアダプタのコードや電源コンセントに触れないでください。感電の原因となります。



- 濡らさないでください。発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所や取り扱いに注意してください。
- 風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 長時間使用しない場合、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。感電、火災、故障の原因となります。
- 電源コンセントにつながれた状態で、電極接点などに手や指など体の一部を触れさせないでください。感電、傷害、故障の原因となります。
- ACアダプタを電源コンセントに差し込むときは金属類を触れさせないよう注意し、確実に差し込んでください。誤った場合、感電、ショート、火災の原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。誤った場合、火災、故障の原因となります。
- 電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、本体、ACアダプタには触れないでください。落雷の際に感電の原因となります。
- 充電中はACアダプタを安定した場所に置いてください。またACアダプタを布などで覆ったり、包んだりしないでください。

## 注意

- ACアダプタを電源コンセントから抜く場合はコードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。感電、火災、故障の原因となります。
- ACアダプタのコードの上に重いものを載せないでください。感電、火災の原因となります。
- ACアダプタをコンセントに差し込む際は、ケーブルが引っ張られないよう配置してください。接触不良の原因となります。

## ご使用になる前に

- 補聴器は聞こえを元に戻すものではなく、聴力を補う機器です。
- 使い始めは音量を小さめにして、慣れてきたら徐々に音量を調節してお使いください。
- 補聴器はお客様専用調整されていますので、他の人に貸したり、他の人の補聴器を装用しないでください。正しく調整されていない補聴器は効果がないばかりか、場合によっては耳を傷めたりする恐れがあります。
- 耳を治療中の方、治療をしたことがある方は主治医にご相談ください。
- 聴力の変化に伴い、補聴器の再調整が必要になる場合がございます。年に一度は耳鼻咽喉科専門医を受診されることをお勧めします。

(フォナック ナイーダ L-PR)

- 耳鳴マスカ機能の使用には医師の処方が必要です。ご使用にあたっては必ず医師の指示に従ってください。

# もくじ

はじめに .....	2
安全上のご注意（必ずお守りください） .....	3
ご使用にあたって .....	4
ご使用になる前に .....	10
本書の器種名の表記について .....	12
各部の名称 .....	14
電池の交換方法（空気電池タイプ） .....	17
充電する（充電タイプ） .....	20
チャイルドロック付き電池ホルダー .....	28
補聴器の使い方 .....	30
多機能ボタンの使い方 .....	39
Bluetooth®を内蔵した機器と初めてペアリングする .....	41
携帯電話で通話する .....	43
タップコントロール .....	47
機内モード .....	48
再起動する（充電タイプ） .....	52
ワイヤレス接続について .....	54
マイフォナック アプリ/マイフォナック ジュニア アプリについて .....	55
便利な機能について .....	56
防塵・防水性能に関する情報と注意 .....	58
ご使用後のお手入れ方法 .....	59
耳せんの交換 .....	61
補聴器の保管 .....	63
初めてお使いになる方に .....	64
無線について .....	65
仕様・性能 .....	66
トラブルシューティング .....	84
アフターサービス .....	86
シンボルマークの説明 .....	87
保証について .....	89
Service Policy and Warranty .....	90
Compliance information .....	91

# 本書の器種名の表記について

本書は、フォナック スカイ ルミティ (スカイ L)、フォナック ナイダー ルミティ (ナイーダ L) の2つが対象です。  
それぞれ4グレードあり、合計16の器種が存在します。

## スカイ L-UP (空気電池タイプ)

フォナック スカイ L90-UP

フォナック スカイ L70-UP

フォナック スカイ L50-UP

フォナック スカイ L30-UP

## スカイ L-PR (充電池タイプ)

フォナック スカイ L90-PR

フォナック スカイ L70-PR

フォナック スカイ L50-PR

フォナック スカイ L30-PR

## ナイーダ L-UP (空気電池タイプ)

フォナック ナイーダ L90-UP

フォナック ナイーダ L70-UP

フォナック ナイーダ L50-UP

フォナック ナイーダ L30-UP

## ナイーダ L-PR (充電池タイプ)

フォナック ナイーダ L90-PR

フォナック ナイーダ L70-PR

フォナック ナイーダ L50-PR

フォナック ナイーダ L30-PR


本文中では、器種名を一部省略する場合があります。該当器種の見方は次の表をご参照ください。

文中の表記 (例)	該当器種
「スカイ L90」	フォナック スカイ L90-UP フォナック スカイ L90-PR
「空気電池タイプ」	フォナック スカイ L90-UP フォナック スカイ L70-UP フォナック スカイ L50-UP フォナック スカイ L30-UP フォナック ナイーダ L90-UP フォナック ナイーダ L70-UP フォナック ナイーダ L50-UP フォナック ナイーダ L30-UP

# 各部の名称

## ■ 空気電池タイプ

電池サイズ：PR44(675)

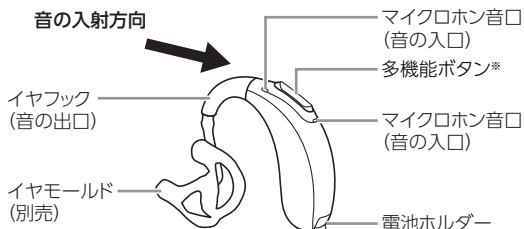


※ フォナック スカイ L-UPタイプの多機能ボタンにはLEDランプが備わっています。

### MEMO

- フォナック スカイ L-UPタイプには、36か月未満の乳幼児用にチャイルドロック付き電池ホルダーおよびフックのご用意があります。また、フォナック ナイダ L-UPタイプにチャイルドロック付電池ホルダー (別売) を装着することもできます。詳しくはお求めの販売店までお問い合わせください。

## ■ 充電タイプ

電池サイズ：充電電池（リチウムイオン電池）

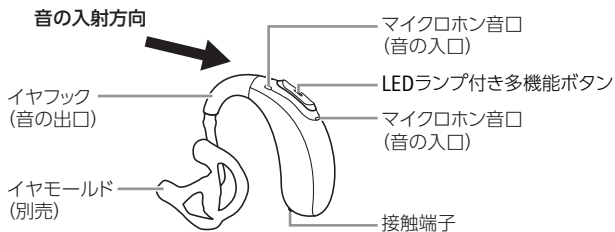


## ■ 耳せん

### イヤフック用

イヤモールド




既製耳せん

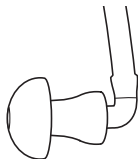


### スリムチューブ 4.0用 (充電タイプのみ)

スリムチップ

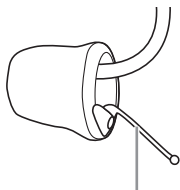

取り出し用テグス

ドーム型耳せん

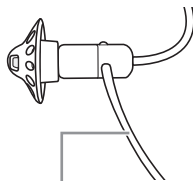


ストッパー




## 電池の交換方法（空気電池タイプ）

チャイルドロック付き電池ホルダーの場合は、28ページを参照してください。

- 1** 新しい電池の保護シールをはがします。シールが貼ってある側が（+）面です。

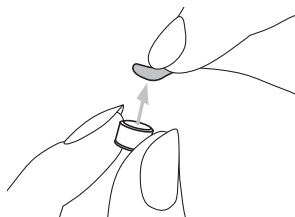


- 2** 電池ホルダーを開け、使用済みの電池を取り出します。

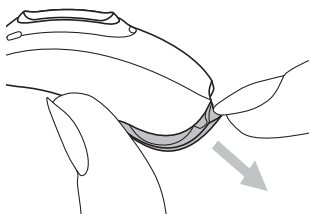

- 3** 新しい電池を電池ホルダーに入れます。電池の（+）面と電池ホルダーの+マークが同じ方向になるようにあわせます。



- 4** カチッと閉まるまで、電池ホルダーをゆっくり押し込みます。

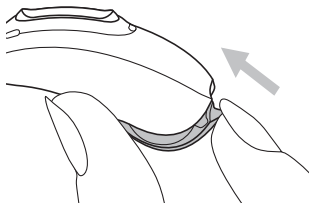

## 注意

- 電池ホルダーは丁寧に扱い、無理な力を加えないでください。
- 電池は本体側ではなく電池ホルダーに入れてください。電池を本体側に入れてから電池ホルダーを閉じようとする、電池ホルダーが破損する恐れがあります。

## MEMO


- 電池ホルダーがうまく閉まらない場合には、電池が正しく収納されているか確認してください。電池の（+）面と（-）面が逆向きに収納されている場合、きちんと閉まりません。
- 補聴器を使用しないときは、電池ホルダーを開けたまま保管してください。
- 電池がなくなりかけると、電池寿命お知らせ音（ピー、ピー）が鳴りますので、電池を新しいものに交換してください。  
(電池が使用できなくなる約60分前に鳴りますが、リモコン等ワイヤレスアクセサリーを使用している場合は短くなるなど、補聴器の使用状態によって異なります。)

# 充電する (充電タイプ)


充電タイプにはリチウムイオン二次電池が内蔵されています。ご使用前の前に、専用の充電器を使って充電してください。

## 充電器

### ■ フォナック チャージャー Combi BTE/2

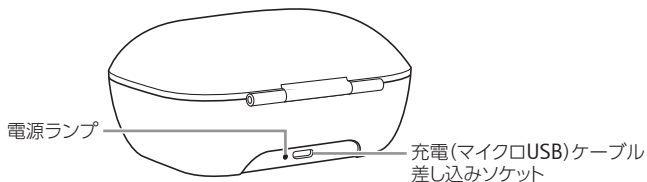


## ■ チャージャー BTE RIC

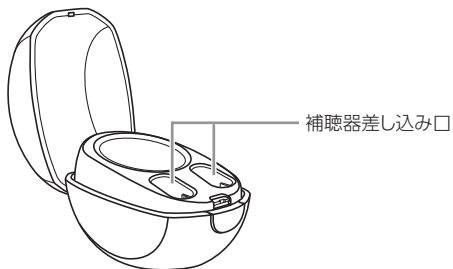


## 充電の準備

### ■ 充電ケーブルを接続する

- 1 充電ケーブルの片方のプラグをACアダプタに、もう一方のプラグを充電ケーブル差し込みソケットに差し込みます。

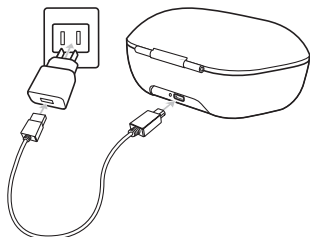

フォナック チャージャー Combi BTE/2

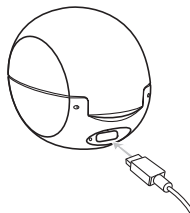


チャージャー BTE RIC

- 2 ACアダプタを電源コンセントに差します。  
電源ランプが緑色に点灯します。

### ⚠ 注意

- 充電ケーブルを折り曲げたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。ACアダプタや充電器との接触不良が生じ、充電不具合の原因となります。

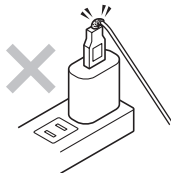


## 充電する

### ■ 充電器を使う


「充電ケーブルを接続する」(22ページ)を参照し、充電ケーブルを事前に接続しておいてください。

**1** 補聴器差し込み口に補聴器本体を入れます。

このとき、補聴器の左右を間違えないようにご注意ください。充電中は補聴器本体のLEDランプが点滅し、充電が完了すると緑色の点灯に変わります。LEDランプの表示については、「お知らせLEDランプの表示」(25ページ)をご参照ください。

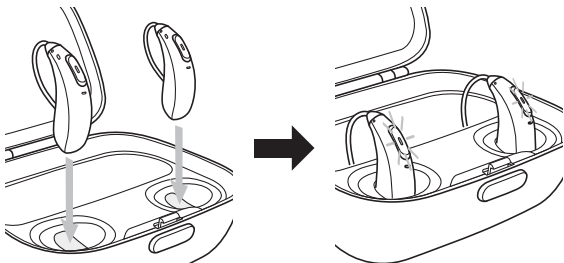

フォナック チャージャー Combi BTE/2

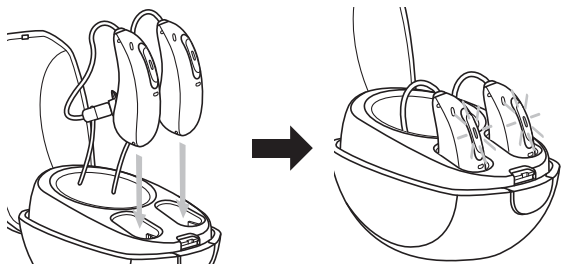


チャージャー BTE RIC


## ⚠ 注意

- 補聴器を充電器に差し込む際は、多機能ボタンに触れないようにしてください。

- 2** 充電が完了したら補聴器を取り出します。  
(1)の方向に引っ張り、(2)の方向に持ち上げて取り出します。  
補聴器は、充電器から取り出すと自動的に電源がオンになります。

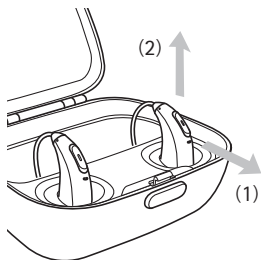

フォナック チャージャー Combi BTE/2

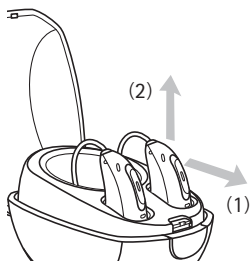

チャージャー BTE RIC

## ⚠ 注意

- 補聴器本体や充電器が汗や水で濡れている場合は、必ず乾いた清潔な布などで拭き取ってから充電してください。



## MEMO

- 周囲温度が5℃から40℃の間で充電してください。
- 過充電防止機能が付いていますので、一昼夜充電が可能です。
- 蓋を閉じた状態でも充電できます。
- 電池がなくなりかけると、電池寿命お知らせ音（ピー、ピー）が鳴りますので、すみやかに充電を開始してください。  
(電池が使用できなくなる約60分前に鳴りますが、ワイヤレス機能を使用している場合は短くなるなど、補聴器の使用状態によって異なります。)
- 充電にかかる時間は以下のとおりです。初めて使用するときは、3時間充電することをお勧めします。
  - 100%充電：約3時間
  - 80%充電：約90分間
  - 50%充電：約60分間
  - 30%充電：約30分間
- 補聴器を取り出すときは、チューブではなく補聴器本体をつまんで取り出してください。

## ■ お知らせLEDランプの表示


充電状態により、お知らせLEDランプは以下のとおりに状態表示を示します。

状態表示	充電状態	充電時間
赤 (点滅)	0~10%	
オレンジ (点滅)	11~80%	約30分間 (30%) 約60分間 (50%) 約90分間 (80%)
緑 (点滅)	81~99%	
緑 (点灯)	100%	約3時間


## ■ パワーパック (別売) を使う

フォナック チャージャー Combi BTE/2のオプション品です。パワーパックにはリチウムポリマー二次電池が内蔵されています。

(パワーパック底部)

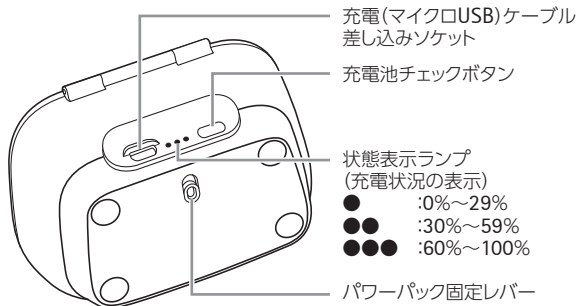

- 1** パワーパックをフォナック チャージャー Combi BTE/2の底部に取り付け、パワーパック固定レバーでロックします。

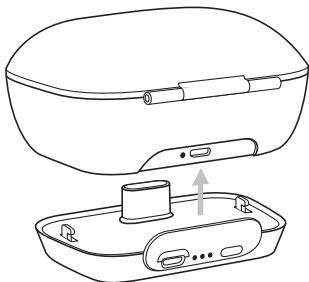

- 2** 補聴器の充電は、「充電器を使う」(23ページ)の手順で行います。

## MEMO


- 充電ケーブルを使ってパワーパックを充電できます。パワーパックをフォナック チャージャー Combi BTE/2に取り付けて充電すると、補聴器とパワーパックを同時に充電することが可能です。
- 充電器は状態表示ランプで充電状況を確認できます。
- 初めて使用するときは、3時間充電することをお勧めします。
- フル充電のパワーパックで2台の補聴器を4回充電することができます。
- パワーパックの充電電池残量を確認するときは、充電電池チェックボタンを押してください。
- 周囲の温度が5℃～40℃の間で充電してください。

# チャイルドロック付き電池ホルダー


電池の誤飲などによる事故を防ぐため、電池を簡単に取り外しできないようにロックすることができます。

対象器種：スカイ L-UP / ナイターダ L-UP (別売)


- 1 新しい電池の保護シールをはがします。シールが貼ってある側が (+) 面です。

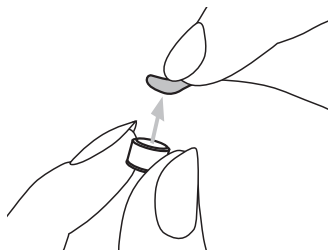


- 2 専用の工具を使って電池ホルダーを開けます。

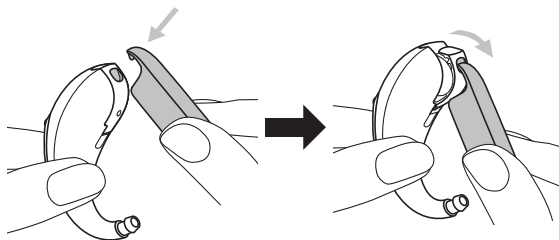

- 3** 新しい電池を電池ホルダーに入れます。電池の (+) 面と電池ホルダーの+マークが同じ方向になるようにあわせます。

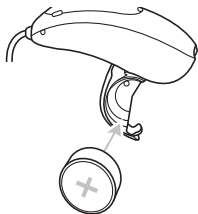

- 4** 電池ホルダーをしっかりと閉めます。電池ホルダーが手で開けられないことを必ず確認してください。

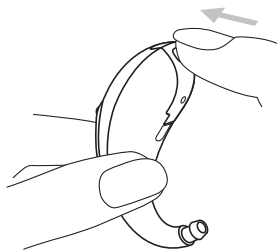


# 補聴器の使い方

## 電源の入れ方／切り方


### ■ 空気電池タイプの場合

電池ホルダーは電源の入／切機能を兼ねています。チャイルドロック付き電池ホルダーの場合は、28ページを参照してください。

- 1 電源を入れる：**  
電池ホルダーを閉めます。

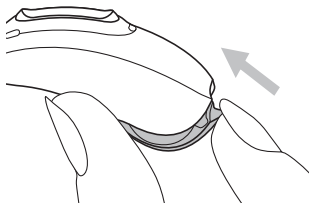

- 2 電源を切る：**  
電池ホルダーを開けます。

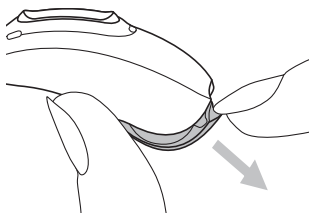


## ■ 充電タイプの場合

### 1 電源を入れる：

補聴器を充電器から取り出すと、自動的に電源がオンになります。補聴器の取り出し方法については、「充電器を使う」の手順2（24ページ）をご参照ください。

多機能ボタンの下部を3秒間長押ししても、電源を入れることができます。

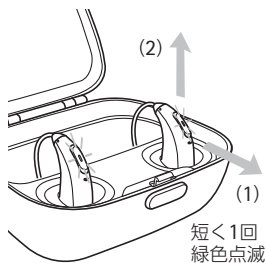

フォナック チャージャー Combi BTE/2



チャージャー BTE RIC

## 2 電源を切る：

多機能ボタンの下部を3秒間長押しします。



### MEMO

- 電源を入れると、補聴器にあらかじめ設定された音量とプログラムが起動します。
- 電源を入れてから数秒後に音が出ます。スタートアップの遅延が設定されている場合は、さらに約6秒または12秒遅れて音が出ます。




## 補聴器の付け方／外し方

### ■ 装用の前に


補聴器には左耳用・右耳用がありますので左右をご確認ください。



空気電池タイプ

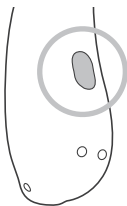

充電タイプ

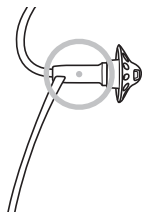


左耳用：青色  
右耳用：赤色


### ■ 補聴器の付け方

イヤモールドの場合：


- 1 図のようにイヤモールドを持ち、耳の穴にゆっくり入れます。  
耳介部分を軽く後ろに引っ張りながら入れると、入れやすくなります。

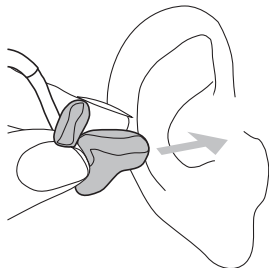

- 2** マイクロホンが耳の上部にくるように、補聴器本体を耳介の後ろにかけます。

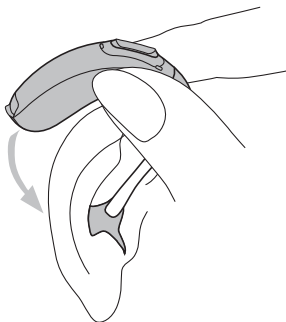


- 3** イヤモールドの上部を耳穴の上部にゆっくり入れます。

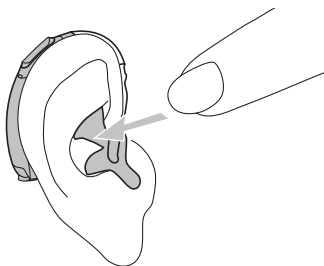


## 既製耳せん／ドーム型耳せん／スリムチップの場合：


- 1 マイクロホンが耳の上部にくるように、補聴器本体を耳介の後ろにかけます。

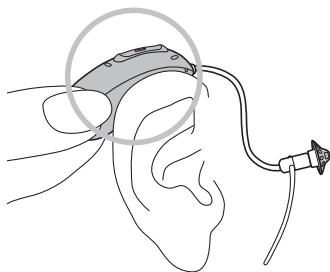

- 2 耳せんが付いているチューブを図のように持ち、外耳道に耳せんをゆっくり押し込みます。  
スリムチップの場合は、耳介部分を軽く後ろに引っ張りながら入れると、入れやすくなります。

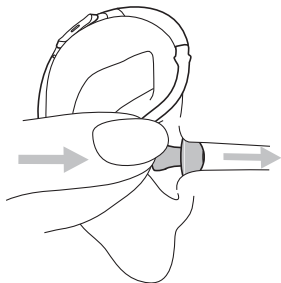


既製耳せん

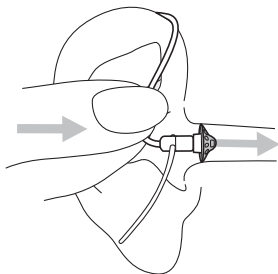

ドーム型耳せん

**3** ストッパーがある場合は図のように耳のくぼみに沿うようにはめます。

最後に、図のように収まっているか指でなぞってご確認ください。

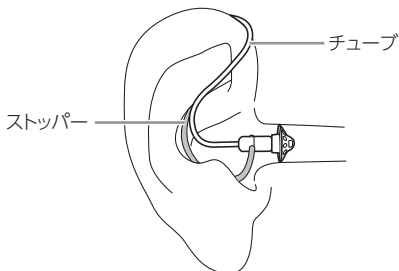

**⚠ 注意**

- ストッパーが長い場合は、少し切り取ることも可能です。その際、固定できないほど短くしないように十分気を付けてください。


**MEMO**

- ストッパーが不要であれば、取り外すことも可能です。お買い求めの販売店にお尋ねください。


## ■ 補聴器の外し方

イヤモールドの場合：

- 1 補聴器本体を耳介から外します。

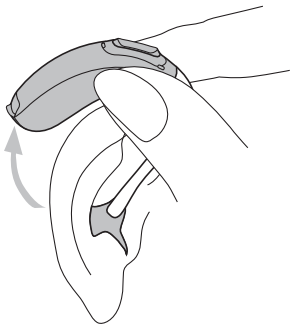


- 2 チューブではなくイヤモールドをつかみ、ゆっくり耳から取り出します。

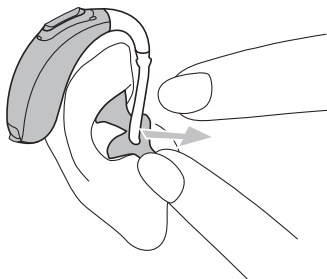


## 既製耳せん／ドーム型耳せん／スリムチップの場合：

図のようにチューブ部分をつかみ、ゆっくり耳から取り出します。

スリムチップの場合は取り出し用テグスを使って取り出します。

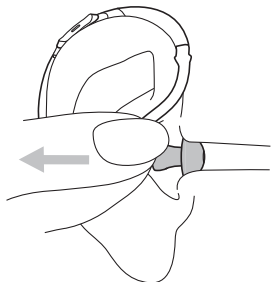

既製耳せん

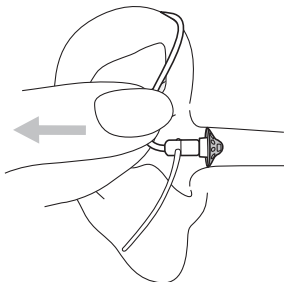


ドーム型耳せん

### ⚠ 注意

- 耳せんは、チューブから簡単には外れないように作られていますが、万が一外れた耳せんが耳の中に入ってしまった場合には、すみやかに医療機関にご相談ください。

# 多機能ボタンの使い方

あらかじめ設定しておくことにより、多機能ボタンの押し方の違いや使用状況によって数種類の機能を使い分けることができます。また、触れても作用しないように設定することも可能です。

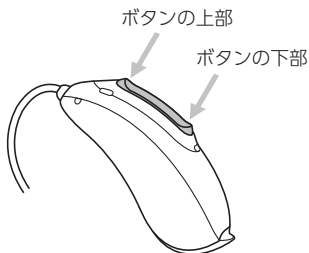

## ■ 通常使用時

	短押し	長押し
ボタンの上部	音量を上げる	プログラムを変更する
ボタンの下部	音量を下げる	プログラムを変更する*

## ■ スตรีミング使用時

	短押し	長押し
ボタンの上部	スตรีミングの音量を上げる	プログラムを変更する
ボタンの下部	スตรีミングの音量を下げる	プログラムを変更する*

## ■ 着信時

	短押し	長押し
ボタンの上部	電話に出る	着信を拒否する
ボタンの下部		着信を拒否する*

## ■ 通話中

	短押し	長押し
ボタンの上部	通話の音量を上げる	電話を切る
ボタンの下部	通話の音量を下げる	電話を切る*

※ 充電タイプはそのまま長押しを続けると（約3秒）、電源が切れます。



# Bluetooth®を内蔵した機器と初めてペアリングする

## MEMO

- Bluetooth® (以下、「Bluetooth」と表記します) を内蔵した機器を使用する際は、初回のみペアリング作業が必要です。一度ペアリングを行えば、補聴器はその機器と自動的に接続されます。ペアリングが完了するまでに最大2分かかります。

- 1** ペアリングしたい機器 (例：携帯電話) がBluetooth利用可能で、Bluetooth画面または接続画面でBluetooth機器の検索ができるか確認してください。
- 2** 「電源を切る」 (空気電池タイプ：30ページ、充電タイプ：32ページ) の手順で補聴器の電源をオフにします。
- 3** 「電源を入れる」 (空気電池タイプ：30ページ、充電タイプ：31ページ) の手順で再度、補聴器の電源をオンにします。  
補聴器の電源を入れると、約3分間ペアリングモード (Bluetooth接続待機状態) になります。

**4** ペアリングしたいBluetooth機器の検出リスト画面に、検出されたBluetooth機器が表示されます。

リスト内から補聴器を選択します。接続されると、接続成功を意味するお知らせ音が補聴器から鳴ります。

#### MEMO

- 両耳補聴器をペアリングモードにしても、Bluetooth機器検出画面リストには片耳のみ表示されます。これはBluetoothの仕様によるもので、このままで問題ありません。

一度Bluetooth機器とペアリングが完了すると、それ以降は、補聴器は電源が入ると自動的に機器と接続します。

#### MEMO

- Bluetooth機器の電源が入っていて、補聴器と接続できる範囲内であれば接続状態は維持されます。
- 補聴器は、マルチポイントペアリング（同時待ち受け）最大2台、マルチペアリング（登録）最大8台まで可能です。


# 携帯電話で通話する

Bluetooth内蔵の携帯電話と接続して、ハンズフリーで通話できます。

携帯電話とペアリングすると、通知、着信通知、通話相手の声が補聴器を介して直接聞こえます。自分の声は補聴器のマイクが拾って通話相手に届けます。

## MEMO

- ハンズフリー通話を行うには、携帯電話がHFPプロファイルに対応している必要があります。

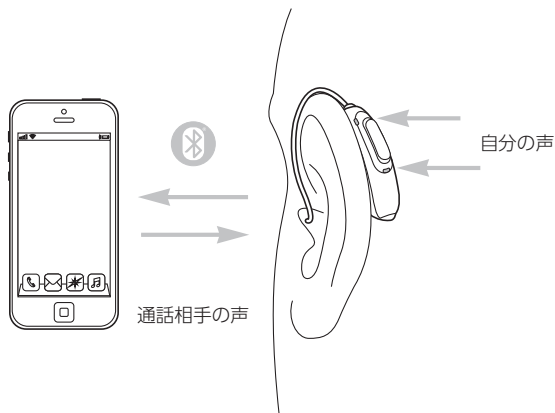

Bluetooth®およびそのロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有し、Sonova AGはライセンスに基づいてこれらの商標を使用しています。

## 携帯電話と接続する

Bluetooth®のワイヤレス機能を使用する場合、「Bluetooth®を内蔵した機器と初めてペアリングする」(41ページ)の手順で事前にペアリングする必要があります。ペアリングが完了すれば、自動的に補聴器と携帯電話が接続されます。

### MEMO

- 互換性がある携帯電話については、以下のURLにアクセスしてご確認ください。(携帯電話の機種によっては、記載がない場合があります)  
<https://www.phonak.com/en-int/support/compatibility> (英文)
- 最大2台の携帯電話と同時待ち受け状態で接続できます(使用中は1台です)。

## 電話をかける

携帯電話で電話番号を入力し、電話をかけます。ダイヤル音が補聴器を通して聞こえます。自分の声は補聴器のマイクが拾って通話相手に届けます。

## 電話を受ける

電話がかかってくると、補聴器から着信音が聞こえます。補聴器にある多機能ボタンの上部または下部を短く押す（約1秒）と電話に出られます。一部の器種はタップコントロール（47ページ）を利用することもできます。



### MEMO

- 携帯電話のボタン操作で電話に出ると、補聴器からではなく携帯電話から音声が聞こえる機種もあります。その場合は、補聴器から音声が聞こえるように、携帯電話から設定を行ってください。

## 電話を切る

補聴器にある多機能ボタンの上部または下部を長押し（2秒以上）するか、通常通り携帯電話で通話を終了します。一部の器種はタップコントロール（47ページ）を利用することもできます。



## 着信を拒否する

着信時に補聴器にある多機能ボタンの上部または下部を長押し（2秒以上）すると、着信を拒否できます。



# タップコントロール

タップコントロールとは、補聴器を装着した状態で、耳の上部を2回タップして操作を行う機能です。

(対応器種)

L90-PR

L70-PR

※充電タイプのみ

Bluetooth対応デバイスと組み合わせることで、電話の受話／終話、ストリーミングの一時停止／再開、ボイスアシスタントの開始／停止と言った複数の機能に割り当てることができます。



# 機内モード


この補聴器は、2.4 GHz-2.48 GHzの周波数帯の電波を受発信します。飛行機内では、電波を発信しない機内モードに設定する必要があります。機内モードに変更すると、補聴器単体としての機能はそのままで、ワイヤレス機能のみ無効になります。

## 機内モードに変更する

機内モードに変更して、ワイヤレス機能を無効にします。


### ■ 空気電池タイプの場合

- 1 電池ホルダーを開けます。

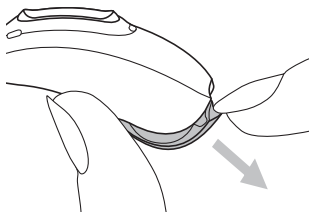

- 2 電池ホルダーを閉めながら、同時に多機能ボタンの下部を7秒間押し続けます。


機内モードになると携帯電話との接続は切断されます。

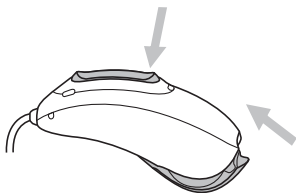



## ■ 充電タイプの場合

- ① 「電源を切る」(32ページ)の手順で補聴器の電源をオフにします。
- ② 多機能ボタンの下部を、LEDランプがオレンジ色に点灯するまで長押しします。  
途中、電源がオンになりLEDランプが緑色に点滅しますが、そのまま押し続けてください。

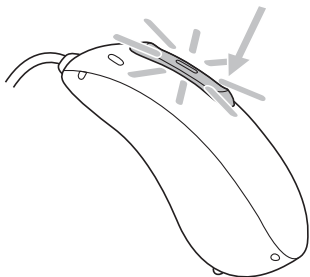


## 機内モードを終了する


機内モードを終了して、ワイヤレス機能を有効にします。

### ■ 空気電池タイプの場合

- 1 電池ホルダーを開けます。

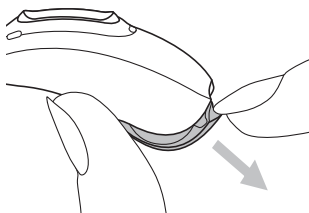


- 2 再度、電池ホルダーを閉めます。

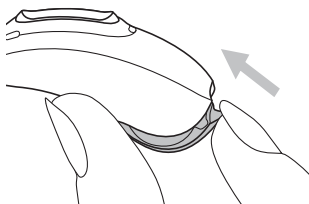

## ■ 充電タイプの場合


- ① 「電源を切る」(32ページ)の手順で補聴器の電源をオフにします。
- ② 「電源を入れる」(31ページ)の手順で再度、補聴器の電源をオンにします。

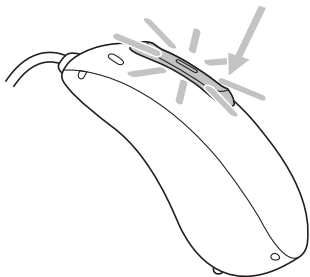


## 再起動する（充電タイプ）

補聴器が正しく作動しない、充電されない、または音が鳴らない場合は、以下の手順で補聴器を再起動してください。このとき、お知らせ音やLEDランプの提示はありません。なお、再起動を行っても、既存の設定は変更されません。


- 1 多機能ボタンの下部を15秒間長押しします。

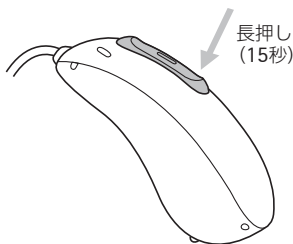

- 2** 電源に接続された充電器に補聴器を差し込みます。補聴器本体のLEDランプが点滅したら再起動完了です。再起動が完了するまで最大30秒かかります。

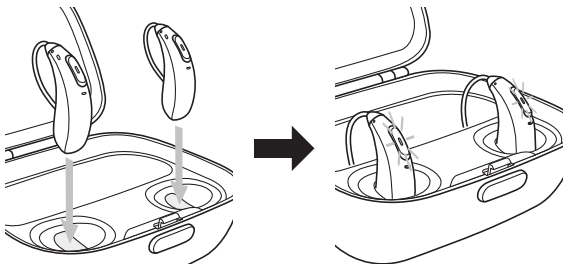


フォナック チャージャー Combi BTE/2

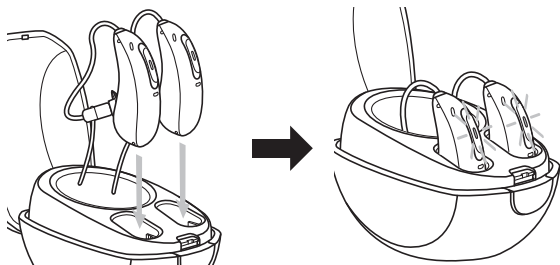

チャージャー BTE RIC

# ワイヤレス接続について

Bluetooth対応機器（携帯電話など）やテレビコネクターD（別売）、ロジャー（別売）からの音声を直接聞き取ることができます。

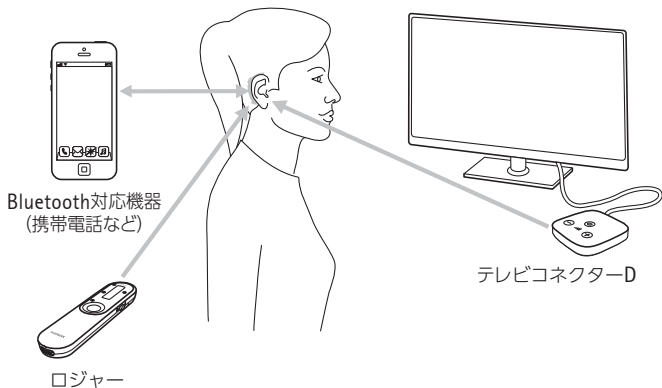

## MEMO

- テレビコネクターDは、テレビやパソコン、そのほかの音響機器などの音源に接続できます。詳しくはテレビコネクターDの取扱説明書、フォナック補聴器のwebサイトをご覧ください。
- ロジャー マイクロホンと接続することもできます。詳しくはお求めの販売店までお問い合わせください。

# マイフォナック アプリ/マイフォナック ジュニア アプリについて

## ■ アプリのインストール

マイフォナック アプリ/マイフォナック ジュニア アプリをスマートフォンにインストールすることができます。以下のQRコードを読み取ってください。

マイフォナック アプリ	マイフォナック ジュニア アプリ
<p>▶ iPhone®を お使いの方</p> 	<p>▶ iPhone®を お使いの方</p> 
<p>▶ Android™を お使いの方</p> 	<p>▶ Android™を お使いの方</p> 



iPhone®は米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

iOS®はCisco Systems, Inc.および/またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Android™はGoogle LLCの商標です。

## ■ 取扱説明書のダウンロード

マイフォナック アプリ/マイフォナック ジュニア アプリの取扱説明書は、以下のQRコードを読み取るか、URLにアクセスし、表示されたWebページ下部のリンクからダウンロードしてご参照ください。

マイフォナック アプリ	マイフォナック ジュニア アプリ
 <a href="https://onl.tw/49p5eVn">https://onl.tw/49p5eVn</a>	 <a href="https://bit.ly/3Yk5HMD">https://bit.ly/3Yk5HMD</a>

取扱説明書ではアプリの各画面の説明や使いかた、設定方法などが確認できます。

# 便利な機能について

## お知らせLEDランプの表示

あらかじめ設定しておくことにより、お知らせLEDランプは以下のとおりに動作状態を示します。

対象器種：フォナック スカイ ルミティ

補聴器の状態	状態表示（緑色）
動作中	ゆっくり点滅
ロジャープログラム使用中	2回点滅（繰り返し）
電池残量少*	連続した点滅
音量変更	1回点滅
プログラム変更	

※ 空気電池タイプは電池切れになる約60分前に表示されます。すみやかに新しい電池に交換してください。また、充電タイプは電池切れになる約60分前に赤色の点滅で表示されます。すみやかに充電してください。

## 電話用プログラム

電話の受話器の音を聞きやすくするプログラムです。

マイクロホン、またはTコイル（充電タイプを除く）を利用できます。

## デュオフォン

デュオフォンは、電話用プログラムを使用中に、片側の受話器の音声を両耳で聞くことができる機能です。（たとえば、右側にあてた受話器の音声が、左側の補聴器からも聞こえます。）両耳で聞くことにより片耳の場合よりも電話の音声を聞き取りやすくなります。

（対応器種）

L90

L70

L50

両耳装用時



## ■ 多機能ボタンまたはリモコン（別売）で切り替える場合

あらかじめ補聴器に電話用プログラムを設定しておき、必要に応じて切り替えます。

受話器をあてる側の耳をあらかじめ設定しておくか、ダイレクトタッチ機能による指定が可能です。

プログラムおよびダイレクトタッチ機能の設定については販売店にご相談ください。

設定	ダイレクトタッチ	電話する側	操作方法
1	オン	右側	右側の補聴器にある多機能ボタンの上部を長押しして、電話用のプログラムに切り替えます。右側の補聴器に入った電話の音声は左側の補聴器に送信されます。
		左側	左側の補聴器にある多機能ボタンの上部を長押しして、電話用のプログラムに切り替えます。左側の補聴器に入った電話の音声は右側の補聴器に送信されます。
2	オフ	右側	左右どちらかの補聴器にある多機能ボタンの上部を長押しするかマイフォナック アプリ/マイフォナック ジュニア アプリで電話用プログラムに切り替えます。右側の補聴器に入った電話の音声は左側の補聴器に送信されます。
3	オフ	左側	左右どちらかの補聴器にある多機能ボタンの上部を長押しするかマイフォナック アプリ/マイフォナック ジュニア アプリで電話用プログラムに切り替えます。左側の補聴器に入った電話の音声は右側の補聴器に送信されます。

※ ダイレクトタッチ機能は多機能ボタンで操作したときのみ有効です。

# 防塵・防水性能に関する情報と注意

補聴器には、下記の防塵・防水性能が備わっています。この性能を維持するため、以下の注意点をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

IP等級	対象製品
IP68	フォナック スカイ L-UP フォナック スカイ L-PR フォナック ナイーダ L-UP フォナック ナイーダ L-PR

## ■ 一般的な注意点

ヘアスプレーやその他の化粧品を使用する場合、補聴器の聞き取りに影響が発生する可能性がありますので、耳から取り外したあとにヘアスプレー等をご使用ください。

## ■ 使用上における注意

- 補聴器は電池ホルダーが完全に閉じた状態でのみ防塵・防水性能を担保します。髪の毛等が挟まれないように電池ホルダーを完全に閉じてご使用ください。(充電タイプを除く)
- 汗やほこりが多く付いてしまった場合、乾いた布等できれいに拭き取り乾燥ケースに入れて乾燥させてください。(このときドライヤーは使用しないでください)
- 日ごろのケアや定期的な点検に関しては、以下をご参照ください。
  - スキューバダイビング、潜水、水上スキーやその他の水上でのアクティビティをされる前には補聴器を取り外してください。
  - 補聴器に水が付着することで電池への空気供給が制限されて一時的に補聴器の動作が止まることがあります。その場合は、柔らかい布もしくはティッシュで水分を拭き取り、濡れていないことを確認してから、電池ホルダーを開けて空気を供給してください。(充電タイプを除く)

# ご使用後のお手入れ方法

補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからのお手入れをお勧めします。

## ■ 空気電池タイプの場合

- 1 補聴器本体から電池を取り出します。
- 2 ティッシュペーパーや柔らかい布で、補聴器本体と電池に付いた汗や汚れを拭き取ります。
- 3 電池ホルダーの中も湿気があるとさびやすいため、綿棒などで水分を取ってください。
- 4 耳あかが音口部にたまると故障の原因となることがあります。付属のブラシで音口部を下に向けて掃除してください。

## ■ 充電タイプの場合

- 1 ティッシュペーパーや柔らかい布で、補聴器本体に付いた汗や汚れを拭き取ります。
- 2 耳あかが音口部にたまると故障の原因となることがあります。付属のブラシで音口部を下に向けて掃除してください。

## 注意

- 補聴器をお手入れする際に、家庭用洗剤（石鹼、洗剤粉など）は絶対にご使用にならないでください。
- 水滴が残る危険があるため、チューブや耳せんを水で洗ったり、水中に入れたりしないようにしてください。
- 水滴がチューブや耳せんに残っていると、音が出ない、または補聴器の電気部分が壊れる恐れがあります。
- チューブと耳せんは3か月に1回のペースで交換してください。また、チューブが硬くなったり、もろくなってきた場合はすぐに交換してください。
- チューブの先端から耳せんを外して耳に装用しないでください。耳を傷つける恐れがあります。

# 耳せんの交換


スリムチューブ 4.0をご使用の場合は、耳せんを交換および清掃する必要があります。

定期的に耳せんをチェックし、汚れていたり音質が低下している場合は交換してください。


交換する目安は4～8週ごとです。

## 耳せんを取り外す

- 1 片方の手でチューブをつまみ、もう一方の手で耳せんをつまみます。

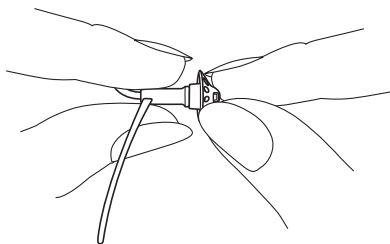


- 2 ゆっくりと耳せんを引き抜きます。  
柔らかい布を使ってチューブをきれいに拭き取ってください。

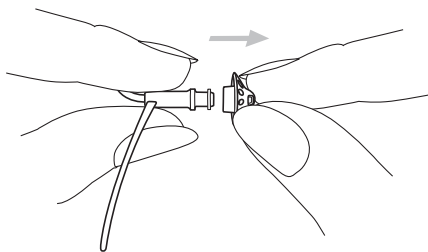


## 耳せんを取り付ける

- 1 片方の手でチューブをつまみ、もう一方の手で耳せんをつまみます。

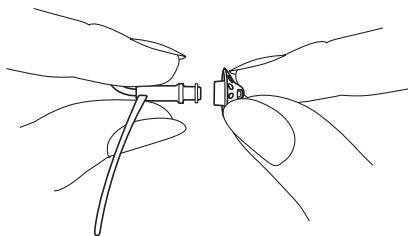

- 2 ゆっくりと耳せんを差し込みます。  
チューブと耳せんが隙間なくしっかり固定されていることを確認してください。

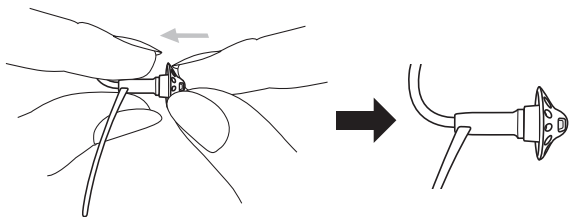

### ⚠ 注意

- 耳せんの取り外し／取り付けを行うときは、無理な力を加えないようにしてください。

# 補聴器の保管

## ■ 空気電池タイプの場合

### 通常の保管方法：

(乾燥ケースを使用される場合)

電池ホルダーを開けたまま補聴器を乾燥ケースに入れてください。

### 携帯する場合：

電池ホルダーを開けたまま補聴器を専用ケースに入れてください。

長期間補聴器をご使用にならない場合は電池を取り外しておいてください。

### 注意

- 補聴器から必ず電池を取り出してください。  
補聴器から取り出した電池は電池寿命が短くなりますので乾燥ケースに入れないようにしてください。

## ■ 充電タイプの場合

充電を行わずに補聴器を保管する場合は、補聴器の電源をオフにしてから充電器に差し込み、蓋を閉めて保管してください。

長期間保管する場合は、必ず定期的に充電してください。

# 初めてお使いになる方に

## ■ 第一段階

はじめは静かな家の中などで使用し、補聴器を付けることに慣れてください。最初は自分の声に違和感がありますが、本などを声に出して読んだりして違和感がなくなるまで練習します。練習は10分ほどから始めて徐々に長くしますが、疲れたらすぐ休んでください。

## ■ 第二段階

静かな部屋で、身近な人と一対一で話す練習をしましょう。

## ■ 第三段階

複数の身近な人と話をする練習をします。どの人が話をしているか聞き分けてみましょう。

## ■ 第四段階

慣れてきたら、外で聞く練習をします。

### MEMO

- 補聴器の音が小さかったり、周囲の音が大きく感じたら販売店にご相談ください。補聴器の再調整が必要となります。







# 無線について

本製品は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しております。

本製品を分解、改造しないでください。

## 技術基準適合証明

フォナック スカイ L90-UP フォナック スカイ L70-UP フォナック スカイ L50-UP フォナック スカイ L30-UP	 [R] 005-102657
フォナック スカイ L90-PR フォナック スカイ L70-PR フォナック スカイ L50-PR フォナック スカイ L30-PR	 [R] 005-102658
フォナック ナイダ L90-UP フォナック ナイダ L70-UP フォナック ナイダ L50-UP フォナック ナイダ L30-UP	 [R] 005-102657
フォナック ナイダ L90-PR フォナック ナイダ L70-PR フォナック ナイダ L50-PR フォナック ナイダ L30-PR	 [R] 005-102658

# 仕様・性能

## ■ 補聴器の電波情報

アンテナタイプ	ループアンテナ（共振式）
周波数	2.4-2.48 GHz
変調方式	GFSK、Pi/4 DPSK、GMSK
出力	1.5 mW未満
<b>Bluetooth®</b>	
通信可能範囲	1 m以下
バージョン	4.2 デュアルモード
プロファイル	HFP、A2DP

## ■ 環境条件

製品は、本製品およびアクセサリのユーザーガイドにしたがって使用された場合に、問題や制限なく機能するように設計されています。補聴器および充電器の使用、充電、輸送、保管は以下の条件下で行ってください。

### 空気電池タイプ

	使用	輸送	保管
温度 (°C)	5~40	-20~60	-20~60
湿度 (%)	0~85	0~93	
気圧 (hPa)	500~1060		

## 充電タイプ

	使用	充電	輸送	保管※
温度 (°C)	5~40		-20~60	-20~60
湿度 (%)	0~85		0~93	
気圧 (hPa)	500~1060			

※ 10°C未満、30°C以上の温度で長期間（1か月以上）保管すると、製品の電池性能に影響を及ぼす可能性があります。

## 充電器

	使用	輸送	保管※
温度 (°C)	5~40	-20~60	-20~60
湿度 (%)	0~85	0~70	
気圧 (hPa)	500~1060		

※ パワーパックを1年以上保管する際の保管温度は-20~25°Cです。

## ■ 電気音響的性能

- 本書に掲載した値はJIS C 5512:2015（2cm<sup>3</sup>カプラで測定）による公称値です。
  - 電池寿命は JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。（フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。）
- ※ L-PRタイプ（充電タイプ）の期待動作時間について：期待動作時間は自社規定の測定値からの参考値です。実際の動作時間は、使用環境や聴力レベル、ワイヤレス機能の使用、電池の使用経過年月により変化します。



フォナック スカイ L90-UP/フォナック スカイ L70-UP  
 フォナック スカイ L50-UP/フォナック スカイ L30-UP  
 (ダンパー入りフック使用時)

補聴器機能使用時

適応聴力範囲		高度～重度
最大音響利得 (50dB入力)	ピーク値 HFA-FOG	78 +3 dB 以下 67 ±5 dB
90dB入力 最大出力音圧レベル	最大OSPL90 HFA-OSPL90	134 +3 dB 以下 129 ±4 dB
等価入力雑音		19 +3 dB 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	3.0+3 %以下 1.0+3 %以下 1.0+3 %以下
規準周波数レスポンス	帯域幅 規準利得 (RTG)	f1 <200 Hz f2 >4600 Hz 52 dB
誘導コイル	ETLS HFA MASL	0 ±4 dB 91 ±6 dB

その他

電池の電流	3.96 (3.3 +20%) mA 以下
使用電池	PR44(675)
電池寿命	110～190時間
利得調整器	可変幅 ±10 dB の場合約 2.0 dB ずつ 5 段階

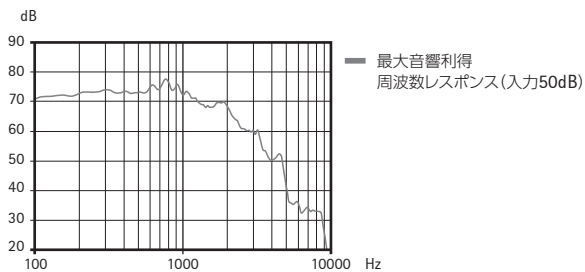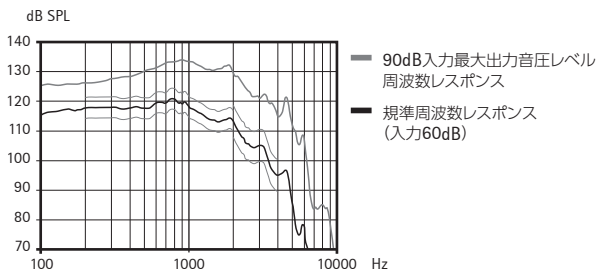



フォナック スカイ L90-UP/フォナック スカイ L70-UP  
 フォナック スカイ L50-UP/フォナック スカイ L30-UP  
 (ダンパーなしフック使用時)

補聴器機能使用時

適応聴力範囲		高度～重度
最大音響利得 (50dB入力)	ピーク値 HFA-FOG	84 +3 dB 以下 68 ±5 dB
90dB入力 最大出力音圧レベル	最大OSPL90 HFA-OSPL90	141 +3 dB 以下 131 ±4 dB
等価入力雑音		19 +3 dB 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	5.0+3 %以下 1.0+3 %以下 1.0+3 %以下
規準周波数レスポンス	帯域幅 規準利得 (RTG)	f1 <200 Hz f2 >4600 Hz 53 dB
誘導コイル	ETLS HFA MASL	0 ±4 dB 91 ±6 dB

その他

電池の電流	3.96 (3.3 +20%) mA 以下
使用電池	PR44(675)
電池寿命	110～190時間
利得調整器	可変幅 ±10 dB の場合約 2.0 dB ずつ 5 段階

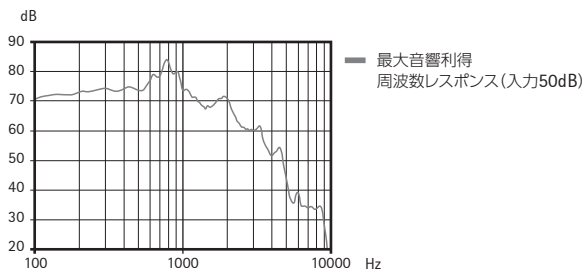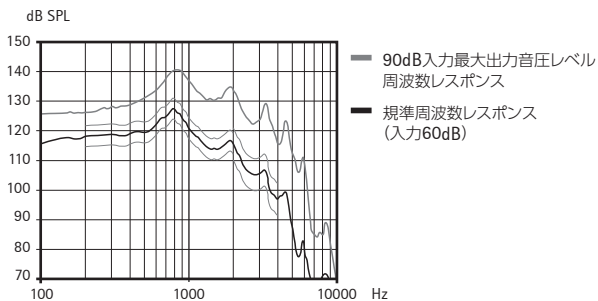

フォナック スカイ L90-PR/フォナック スカイ L70-PR  
 フォナック スカイ L50-PR/フォナック スカイ L30-PR  
 (スリムチューブ 4.0使用時)



補聴器機能使用時

適応聴力範囲		軽度～高度
最大音響利得 (50dB入力)	ピーク値 HFA-FOG	69 +3 dB 以下 51 ±5 dB
90dB入力 最大出力音圧レベル	最大OSPL90 HFA-OSPL90	129 +3 dB 以下 116 ±4 dB
等価入力雑音		19 +3 dB 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	1.0+3 %以下 1.0+3 %以下 2.0+3 %以下
規準周波数レスポンス	帯域幅 規準利得 (RTG)	f1 <200 Hz f2 >5000 Hz 39 dB

その他

使用電池	リチウムイオン二次電池
期待動作時間*	18時間
利得調整器	可変幅 ±10 dB の場合約 2.0 dB ずつ 5 段階



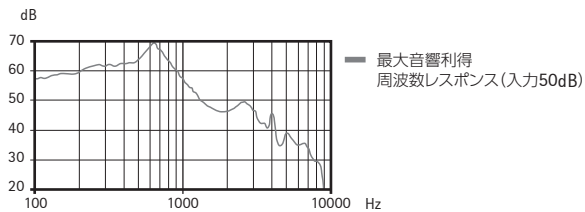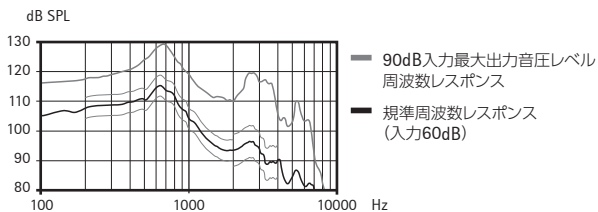



フォナック スカイ L90-PR/フォナック スカイ L70-PR  
 フォナック スカイ L50-PR/フォナック スカイ L30-PR  
 (ダンパー入りフック使用時)

補聴器機能使用時

適応聴力範囲		軽度～高度
最大音響利得 (50dB入力)	ピーク値 HFA-FOG	68 +3 dB 以下 63 ±5 dB
90dB入力 最大出力音圧レベル	最大OSPL90 HFA-OSPL90	130 +3 dB 以下 125 ±4 dB
等価入力雑音		19 +3 dB 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	4.0+3 %以下 3.0+3 %以下 2.0+3 %以下
規準周波数レスポンス	帯域幅 規準利得 (RTG)	f1 <200 Hz f2 >5000 Hz 48 dB

その他

使用電池	リチウムイオン二次電池
期待動作時間*	18時間
利得調整器	可変幅 ±10 dB の場合約 2.0 dB ずつ 5 段階

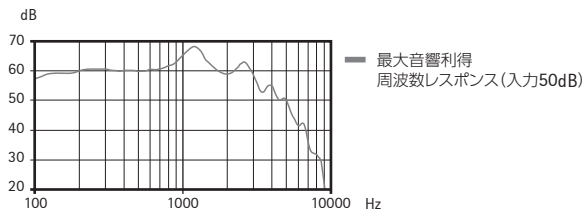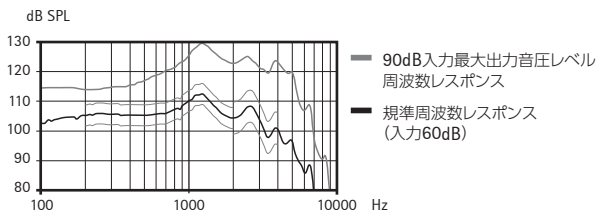



フォナック ナイード L90-UP/フォナック ナイード L70-UP  
 フォナック ナイード L50-UP/フォナック ナイード L30-UP  
 (ダンパー入りフック使用時)

補聴器機能使用時

適応聴力範囲		高度～重度
最大音響利得 (50dB入力)	ピーク値 HFA-FOG	78 +3 dB 以下 67 ±5 dB
90dB入力 最大出力音圧レベル	最大OSPL90 HFA-OSPL90	134 +3 dB 以下 129 ±4 dB
等価入力雑音		19 +3 dB 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	3.0+3 %以下 1.0+3 %以下 1.0+3 %以下
規準周波数レスポンス	帯域幅 規準利得 (RTG)	f1 <200 Hz f2 >4600 Hz 52 dB
誘導コイル	ETLS HFA MASL	0 ±4 dB 91 ±6 dB

その他

電池の電流	3.96 (3.3 +20%) mA 以下
使用電池	PR44(675)
電池寿命	110～190時間
利得調整器	可変幅 ±10 dB の場合約 2.0 dB ずつ 5 段階

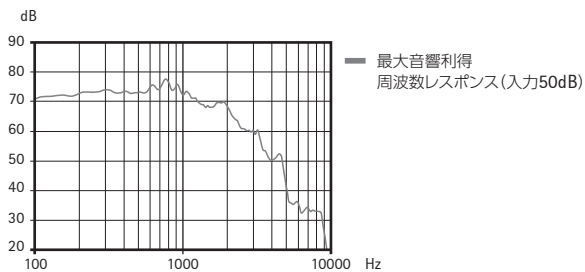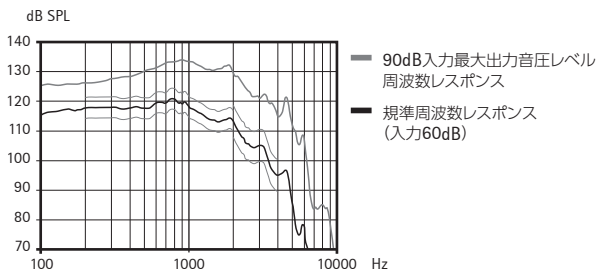



フォナック ナイード L90-UP/フォナック ナイード L70-UP  
 フォナック ナイード L50-UP/フォナック ナイード L30-UP  
 (ダンパーなしフック使用時)

補聴器機能使用時

適応聴力範囲		高度～重度
最大音響利得 (50dB入力)	ピーク値 HFA-FOG	84 +3 dB 以下 68 ±5 dB
90dB入力 最大出力音圧レベル	最大OSPL90 HFA-OSPL90	141 +3 dB 以下 131 ±4 dB
等価入力雑音		19 +3 dB 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	5.0+3 %以下 1.0+3 %以下 1.0+3 %以下
規準周波数レスポンス	帯域幅 規準利得 (RTG)	f1 <200 Hz f2 >4600 Hz 53 dB
誘導コイル	ETLS HFA MASL	0 ±4 dB 91 ±6 dB

その他

電池の電流	3.96 (3.3 +20%) mA 以下
使用電池	PR44(675)
電池寿命	110～190時間
利得調整器	可変幅 ±10 dB の場合約 2.0 dB ずつ 5 段階

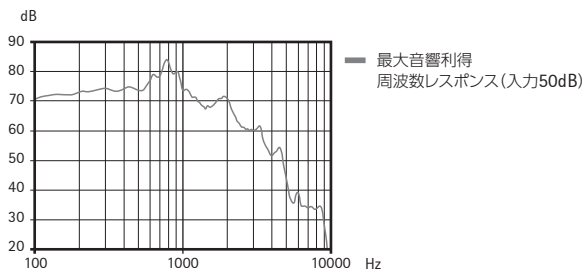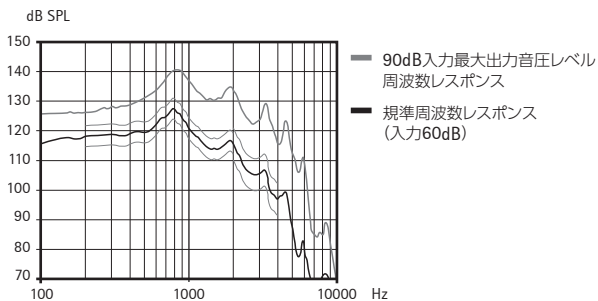

フォナック ナイード L90-PR/フォナック ナイード L70-PR  
 フォナック ナイード L50-PR/フォナック ナイード L30-PR  
 (スリムチューブ 4.0使用時)

補聴器機能使用時

適応聴力範囲		軽度～高度
最大音響利得 (50dB入力)	ピーク値 HFA-FOG	69 +3 dB 以下 51 ±5 dB
90dB入力 最大出力音圧レベル	最大OSPL90 HFA-OSPL90	129 +3 dB 以下 116 ±4 dB
等価入力雑音		19 +3 dB 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	1.0+3 %以下 1.0+3 %以下 2.0+3 %以下
規準周波数レスポンス	帯域幅 規準利得 (RTG)	f1 <200 Hz f2 >5000 Hz 39 dB



耳鳴マスカ機能使用時 (ベント閉塞設定)

最大出力音圧レベル	ピーク値	66 +5 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル		90 ±5 dB

その他

使用電池	リチウムイオン二次電池
期待動作時間※	18時間
利得調整器	可変幅 ±10 dB 約 2.0 dB ずつ 5 段階



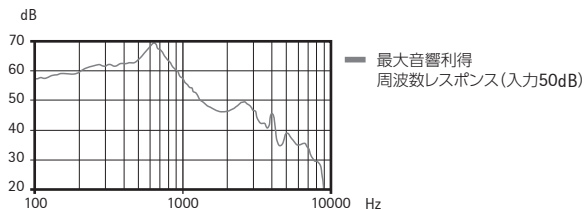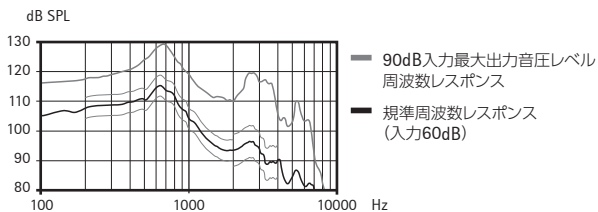

フォナック ナイード L90-PR/フォナック ナイード L70-PR  
 フォナック ナイード L50-PR/フォナック ナイード L30-PR  
 (ダンパー入りフック使用時)

補聴器機能使用時



適応聴力範囲		軽度～高度
最大音響利得 (50dB入力)	ピーク値 HFA-FOG	68 +3 dB 以下 63 ±5 dB
90dB入力 最大出力音圧レベル	最大OSPL90 HFA-OSPL90	130 +3 dB 以下 125 ±4 dB
等価入力雑音		19 +3 dB 以下
全高調波ひずみ	500 Hz	4.0+3 %以下
	800 Hz	3.0+3 %以下
	1600 Hz	2.0+3 %以下
規準周波数レスポンス	帯域幅 規準利得 (RTG)	f1 <200 Hz f2 >5000 Hz 48 dB

耳鳴マスカ機能使用時 (ベント閉塞設定)

最大出力音圧レベル	ピーク値	70 +5 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル		83 ±5 dB

その他

使用電池	リチウムイオン二次電池
期待動作時間※	18時間
利得調整器	可変幅 ±10 dB 約 2.0 dB ずつ 5 段階

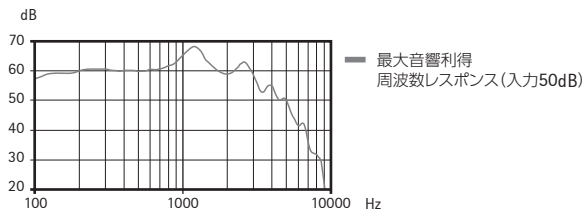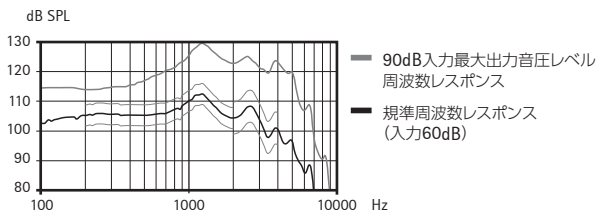

# トラブルシューティング

## ■ 全タイプ共通

### 問題

音量が十分でない

### 原因

音量が小さすぎます

電池残量／充電が少なくなっています

音の出口に耳あかやゴミがつまっています

正しく耳に入っていません

聴力が変化しています

お知らせ音（ピー、ピー）が鳴った

電池残量／充電が少なくなっています

電話ができない

機内モードに設定されています

携帯電話と接続されていません

## ■ 空気電池タイプ

### 問題

電源が入らない

### 原因

電池残量が少なくなっています

電源がオン／オフを繰り返す

電池もしくは補聴器が濡れています

## ■ 充電タイプ

### 問題

電源が入らない

### 原因

充電が少なくなっています

多機能ボタンが15秒押されたことにより機能が停止しています

充電器に差し込んでも補聴器のLEDランプが点灯しない

補聴器が充電器に正しく差し込まれていません

充電器が電源に接続されていません

充電電池が過放電しています

補聴器を充電器に差し込んでいる間、補聴器のLEDランプが赤く点灯している

接触端子が汚れています

周囲温度が範囲外です

充電電池の不具合の可能性があります

充電器から取り外すと、補聴器のLEDランプが消灯する

「自動電源オン」機能が無効になっています

充電器から取り外した後、補聴器のLEDランプが緑色に点灯している

補聴器の電源が完全に切られていない状態で充電器に差し込まれています

### 対処方法

多機能ボタンで音量を上げてください (39ページ)

空気電池タイプの場合は、新しい電池に交換してください (17ページ)

充電タイプの場合は、充電してください (20ページ)

耳せんやチューブを掃除してください (59ページ)

きちんと耳に入れなおしてください (33ページ)

耳鼻咽喉科医師の診察を受けてください

空気電池タイプの場合は、新しい電池に交換してください (17ページ)

充電タイプの場合は、充電してください (20ページ)

機内モードを終了してください (50ページ)

携帯電話と接続してください (44ページ)

### 対処方法

新しい電池に交換してください (17ページ)

乾いた布で水分を拭き取ってください

### 対処方法

充電してください (20ページ)

「再起動する (充電タイプ)」の手順2の方法で充電してください (53ページ)

補聴器を充電器に正しく差し込んでください (23ページ)

充電器を電源コンセントに接続してください (22ページ)

LEDの動作に関係なく、補聴器を充電器で3時間充電してください

補聴器と充電器の接点を掃除してください

周囲温度が5℃から40℃の範囲を超えていないか確認してください

お求めの販売店にご相談ください

多機能ボタンで電源を入れてください (31ページ)

補聴器を再起動してください (52ページ)

# アフターサービス

## ■ 保証書（別途添付）

必ず「販売店名」、「お買い上げ日」などの記載をお確かめになり、大切に保管してください。

## ■ 修理について

保証書を一緒に販売店へお持ちください。保証書に記載された内容に応じて修理いたします。

## ■ その他

アフターサービスなどについてのご不明な点は、お求めの販売店までお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2023年8月現在のものです。各製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

※ この補聴器は耳を保護する目的で出力120dB SPL以下、利得25dB以下に設定し出荷いたしております。

# シンボルマークの説明



CE 記号は、アクセサリ類を含む製品が医療機器規則(EU) 2017/745および RE 指令2014/53/EUの通信と通信機器・送信機の基準を満たしていることを示しています。CE 記号に続く番号は指導した認証機関のコードを表します。



この記号は、補聴器を使われる人が取扱説明書に書いてある警告に十分な注意を払う必要があることを示しています。



この記号は、製品の取り扱いと有効利用に関する重要な情報を示しています。



この記号は、取扱説明書に載っている製品説明が EN60601-1のタイプB に則っていることを表します。



この記号は、EC (欧州共同体) での指定代理人を示しています。



この記号は、この製品の製造元の名称と所在地を示しています。



この記号は、通常と異なるごみ処理が要求される可能性があることを意味します。処分される際はお住まいの自治体が定める方法に従ってください。



この記号は、製品の製造番号 (シリアルナンバー) を示しています。



この記号は、この製品を特定できるメーカーのカタログ番号を示します。



この記号は、製品が医療機器であることを示します。



この記号は、補聴器を使われる人がこの取扱説明書に書いてある内容を読み理解してもらうことが大事であることを示しています。

## IP68

IP規格・防水保護構造及び保護等級。IP68は、補聴器に水および塵に対する耐性が備わっていることを指します。IEC 60529の規格に準拠し、水深1mに60分間入れた後および粉塵試験装置に8時間入れた後でも、補聴器が耐えられることを示します。



この記号は医療機器の製造日を示しています。

## 輸送／保管条件



この記号は、製品の輸送、保管時の温度制限（上限値と下限値）を示しています。



この記号は、製品の輸送、保管時の湿度制限（上限値と下限値）を示しています。



この記号は、製品の輸送、保管時の気圧制限（上限値と下限値）を示しています。



この記号は、製品の輸送、保管時に水濡れ厳禁であることを示しています。



Bluetooth®およびそのロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有し、Sonova AGはライセンスに基づいてこれらの商標を使用しています。  
その他の商標および商標名は、各所有者に帰属します。



この記号は、日本の電波法令で定められている技術基準に適合している無線機であることを示しています。



# 保証について

## ■ 日本国内における保証期間

日本国内における本製品の無償保証期間は、L90 はお買い上げ日より3年間、それ以外の器種は2年間です。支援法対応器種は1年間となります。お手元の保証書をご確認ください。

無償修理の際、保証書が必要になりますが、製品に同梱されている保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」の記載があることを確認の上、大切に保管してください。

## ■ 日本国外における保証期間（国際保証）

日本以外の国における本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証対象は、シェル、耳せん、チューブ、アクセサリパーツ、電池を除く補聴器本体および充電器となります。保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」の記載があることを確認の上、大切に保管してください。

当規定は上記の修理保証規定により交換・修理をお約束するものであり、法律上のお客様の権益を制限するものではありません。

## ■ 保証適用除外

お客様または第三者の誤った使用・過失・改造による故障および損傷に対しての修理に関しては、保証期間内であっても保証適用外となります。修理は、ソノヴァ・ジャパンが指定するサービスセンターでのみ行ってください。

また、補聴器の専門家による補聴器の調整やアフターケア等のサービスに対しても、保証対象ではありません。

## ■ 紛失・盗難・全損時リニューアルサポート（L90/L70のみ）

紛失および盗難による本サポート適用には、保証書のほか、遺失届／盗難届等の証明書類が必要です。

# Service Policy and Warranty

---

## ■ Local Warranty

Please ask the hearing care professional where you purchased your hearing aids and chargers about the terms of the local warranty.

## ■ International Warranty

Sonova AG offers a one year limited international warranty, valid from the date of purchase. This limited warranty covers manufacturing and material defects in the hearing aid and chargers, but not accessories such as batteries, tubes, earpieces. The warranty only comes into force if a proof of purchase is shown.

The international warranty does not affect any legal rights that you might have under applicable national legislation governing sale of consumer goods.

## ■ Warranty Limitation

This warranty does not cover damage from improper handling or care, exposure to chemicals or undue stress.

Damage caused by third parties or non-authorized service centers renders the warranty null and void. This warranty does not include any services performed by a hearing care professional in their office.

# Compliance information

Emissions Test	Compliance	Electromagnetic environment guidance
RF emissions CISPR 11	Group 2 Class B	The medical device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emission are very low and are not likely to cause any interferences in nearby electronic equipment
Harmonic emissions	Complies	
Voltage fluctuations / flicker emissions	Complies	

## Electromagnetic compatibility (EMC)

Phonak hearing aids and charging accessories are EMC-tested in conformity with the requirements of IEC 60601-1-2:2014 or IEC 60601-1-2:2014 A1 2020.











製造販売業

ソノヴァ・ジャパン株式会社

〒140-0002

東京都品川区東品川2-5-8

天王洲パークサイドビル

TEL 0120-06-4079(お客様相談窓口)

FAX 0120-23-4080

[www.phonak.com/jp/ja](http://www.phonak.com/jp/ja)

許可番号 13B2X10021

管理医療機器 耳かけ型補聴器

販売名:フォナック スカイ ルミティ 認証番号 305ABBZX00028000

販売名:フォナック ナイーダ ルミティ 認証番号 305ABBZX00026000

販売店名

**sonova**  
HEAR THE WORLD



**CE**  
0459