

## フォナック オーデオ P 充電器オプション



### チャージャーケース Combi

チャージャーケース Combi は、充電器、乾燥キット、および保管ケースが1つにまとまった製品です。さらに、頑丈で防滴のハウジングにクリーニングツールが備わっています。

### パワーパック

パワーパックは、充電式補聴器をいつでもどこでも充電できるようにするために、チャージャーケース Combi の底に簡単に装着できるようになっています。

### ミニチャージャーケース

USB-C 充電差込口を備えたミニチャージャーケースは、2つの補聴器を充電できるコンパクトな充電器です。

## フォナック オーデオ P Bluetooth® バージョン

ダイレクト コール / オーディオ スตรีミング	Bluetooth® 4.2のワイヤレステクノロジーと、 ほぼすべての旧式 Bluetooth 電話に対応
------------------------------	--

Bluetooth® のワード マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

## ワイヤレス コミュニケーション ポートフォリオ

	オーデオ P-312 オーデオ P-312 トライアル P90/P70/P50/P30	オーデオ P-13T オーデオ P-13T トライアル P90/P70/P50/P30	オーデオ P-R オーデオ P-R トライアル P90/P70/P50/P30	オーデオ P-RT オーデオ P-RT トライアル P90/P70/P50/P30
<b>ワイヤレス アクセサリー</b>				
テレビコネクター	•	•	•	•
フォナック パートナー マイク	•	•	•	•
フォナック リモートコントロール	•	•	•	•
<b>ロジャー</b>				
ロジャーダイレクト	•	•	•	•
<b>アプリ</b>				
マイフォナック	•	•	•	•

詳細に関しては、[www.phonakpro.com/audeoparadise](http://www.phonakpro.com/audeoparadise)をご覧ください。  
ロジャー マイクロホンの詳細については、[www.phonakpro.com/roger](http://www.phonakpro.com/roger) をご覧ください。  
詳細に関しては、[www.phonakpro.com/smartapps](http://www.phonakpro.com/smartapps) をご覧ください。

## life is on

フォナックは、よりよい聞こえが人々の健康に深くつながり、人生を豊かにするために欠かせないものと考えています。そのため、私たちは70年以上にわたり、補聴器やワイヤレス通信機器などの研究開発に情熱を傾けてきました。これからも、聞こえに悩むすべての人々のアクティブで健康的な毎日を支え、前向きな心と豊かな感性を育むために、革新的な聞こえのソリューションをお届けします。

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

# フォナック オーデオ P

## 製品情報



027-0602-17/V1.00/2020-04/NL.G © 2020 Sonova AG All rights reserved

フォナック オーデオ P は、軽度から重度難聴の方を対象とした、幅広くご利用いただける RIC タイプの補聴器です。フォナック オーデオ P は、4つのデザイン、4つのレシーバ、および4つのパフォーマンスレベルで構成されており、耳鳴り音響療法のためのノイズジェネレーター機能もあります。フォナック パラダイス プラットフォームの革新的なテクノロジーを搭載したフォナック オーデオ P は、柔軟で目立たない RIC タイプの補聴器で、最適な聴覚パフォーマンスを望むお客様に理想的なソリューションです。

詳細に関しては、[www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com) をご覧ください。

## 製品概要

			
オーディオ P-312 オーディオ P-312 トライアル P90/P70/P50/P30	オーディオ P-13T オーディオ P-13T トライアル P90/P70/P50/P30	オーディオ P-R オーディオ P-R トライアル P90/P70/P50/P30	オーディオ P-RT オーディオ P-RT トライアル P90/P70/P50/P30
電池サイズ	312	13	
多機能ボタン	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
T コイル		<span>●</span>	<span>●</span>
Bluetooth®	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
ナノ コーティング	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
国際保護等級 IP	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
サイズ	縦x幅x奥行		
	26.8 x 11.2 x 7.1 mm	29.0 x 11.9 x 8.1 mm	28.0 x 11.9 x 8.0mm
	重さ		
	1.1 g	1.4 g	2.1 g
充電時間 <sup>2</sup>	0%~100%		
	0%~80%		
	30分フィッティング		

S レシーバ					
最大出力音圧(dB SPL)	2ccカブラデータ	111	111	111	111
最大利得(dB)	2ccカブラデータ	47	47	47	47
周波数レンジ(Hz)		<100~>8000	<100~>8000	<100~>8000	<100~>8000
使用電流(mA)		1.4	1.4		

M レシーバ					
最大出力音圧(dB SPL)	2ccカブラデータ	114	114	114	114
最大利得(dB)	2ccカブラデータ	51	51	51	51
周波数レンジ(Hz)		<100~>8000	<100~>8000	<100~>8000	<100~>8000
使用電流(mA)		1.4	1.4		

P レシーバ					
最大出力音圧(dB SPL)	2ccカブラデータ	122	122	122	122
最大利得(dB)	2ccカブラデータ	59	59	59	59
周波数レンジ(Hz)		<100~>6300	<100~>6300	<100~>6300	<100~>6300
使用電流(mA)		1.5	1.5		

UP レシーバ					
最大出力音圧(dB SPL)	2ccカブラデータ	132	132	132	132
最大利得(dB)	2ccカブラデータ	71	71	71	71
周波数レンジ(Hz)		<100~>6100	<100~>6100	<100~>6100	<100~>6100
使用電流(mA)		1.4	1.4		

## ハウジング カラー

						
P1 サンド ベージュ	HO ページュ	P4 チェスト ナット	P5 シャンパン	P6 シルバー グレー	P7 グラファイト グレー	P8 ベルベット ブラック

## パフォーマンスレベル

	プレミアム クラス P90	アドバンス クラス P70	スタン ダード クラス P50	エッセン シャル クラス P30	
<b>オートセンスOS 4.0</b>	プレミアム クラス	アドバンス クラス	スタンダー ドクラス	エッセンシャ ルクラス	<b>機能</b>
	ウルトラズーム	プレミアム クラス	アドバンス クラス	スタンダー ドクラス	エッセンシャ ルクラス

反響する環境での快適性	<span>●</span>				ダイナミックノイズキャンセラー	<span>●</span>			
車内でのことば	<span>●</span>				スピーチエンハンサー	<span>●</span>			
非常に騒がしい中でのことば	<span>●</span>				エコブロック	<span>●</span>			
音楽	<span>●</span>	<span>●</span>			タップコントロール*				
騒音下での快適性	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>		-Siri/Google アシスタント	<span>●</span>	<span>●</span>		
騒音下でのことば	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	-ストリーミングの一時停止/再開	<span>●</span>	<span>●</span>		
静かな環境	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	-通話を受ける/切る	<span>●</span>	<span>●</span>		
メディア ことば +マイク	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	ステレオズーム	<span>●</span>	<span>●</span>		
メディア 音楽 +マイク	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	ウインドブロック	<span>●</span>	<span>●</span>		
<b>追加のプログラム</b>					サウンドリラックス	<span>●</span>	<span>●</span>		
最大プログラム数	4	4	4	4	モーションセンサーによる聞こえ*	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	
反響する環境での快適性	<span>●</span>				デュオフォン	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	
非常に騒がしい中でのことば	<span>●</span>	<span>●</span>			リアルイヤーサウンド	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	
全方向(360° )からのことば	<span>●</span>	<span>●</span>			ロジャーと指向性設定	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	
騒音下でのことば	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>		サウンドリカパー2	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
静かな環境	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	ノイズスルブロック	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
騒音下での快適性	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	ノイズブロック	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
音楽	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	ロジャーダイレクト	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
電話	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	ユーザー志向のチューニング	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
カスタム プログラム	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	クイックシンク	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
<b>ストリーミング プログラム</b>					AOV	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
ロジャー ダイレクト + マイク	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	耳鳴りバランス	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
パートナーマイク + マイク	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	自動順応マネージャ	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
通話 + マイク	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	環境バランス	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
					微調整チャンネル	20	20	16	12

\* フォナック オーデオ P-R 及び RT のみで利用できます。


## フィッティング

	オーディオ P-312 オーディオ P-312 トライアル P90/P70/P50/P30	オーディオ P-13T オーディオ P-13T トライアル P90/P70/P50/P30	オーディオ P-R オーディオ P-R トライアル P90/P70/P50/P30	オーディオ P-RT オーディオ P-RT トライアル P90/P70/P50/P30
フォナック ターゲット	7.0以降	7.0以降	7.0以降	7.0以降
Noahlink Wireless	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
NOAHLink		<span>●</span>		
HI-PRO、HI-PRO2		<span>●</span>		

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。IOS は Cisco, Inc. の商標です。Android は Google, Inc. の商標です。

## 音響カプリング

長さ	S レシーバ	M レシーバ	P レシーバ	UP レシーバ
左右の異なる4つの長さで利用可(0、1、2、3)	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
<b>耳せん</b>				
キャップ型耳せん	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	
オープン型耳せん	3つのサイズで利用可(S、M、L)	<span>●</span>	<span>●</span>	
ベント付き耳せん	3つのサイズで利用可(S、M、L)	<span>●</span>	<span>●</span>	
パワー型耳せん	3つのサイズで利用可(S、M、L)	<span>●</span>	<span>●</span>	
<b>スリムチップ*</b>				
アクリル	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	
シリコン	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	
<b>Cシェル</b>				
アクリル	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
チタン	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>	<span>●</span>
<b>フィッティングレンジ</b>				

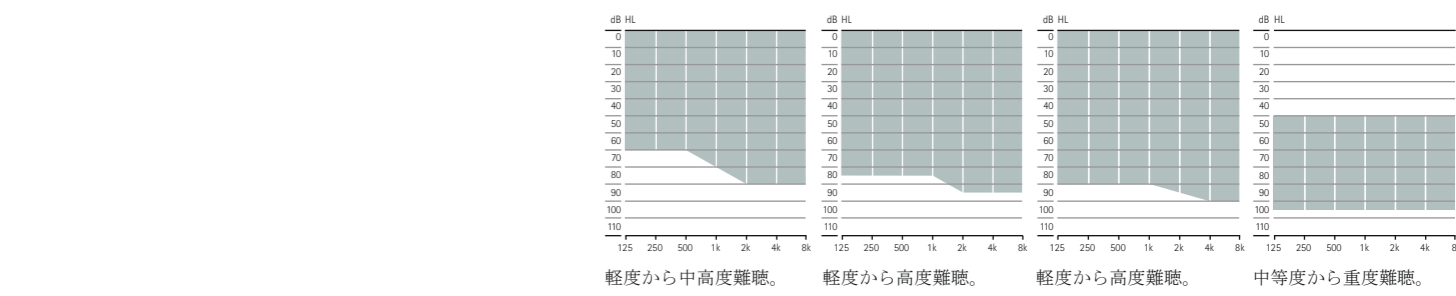

# フォナック オーデオ P トライアル

新しいフォナック オーデオ P トライアルは、専門家の推奨するパフォーマンスレベルに適合するよう、目的のクラスに速やかに設定できるようになっています。フォナック オーデオ P トライアル補聴器1つにすべてのクラスの技術が搭載されているので、初回診断時または補聴器修理中の代替品として聞こえのソリューションを提供する際、専門家は多くの選択肢を得られます。

<sup>[1]</sup> IP68は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深1mに長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています(IEC60529規格による)。

<sup>[2]</sup> 実際の充電時間は、電池残量によって変わりますが、3時間を超えることはありません。

<sup>[\*]</sup> 外耳延長オプションが利用可能