

O que torna o Marvel ainda mais maravilhoso?

O Phonak Bolero Marvel pode se conectar diretamente a smartphones iOS® ou Android™ ou a outros telefones habilitados para Bluetooth® e transmitir qualquer tipo de áudio para os dois ouvidos. Seus usuários podem desfrutar de chamadas telefônicas verdadeiramente em modo mãos livres com microfones internos. Além disso, as notificações sonoras do telefone podem ser configuradas para serem ouvidas pelos aparelhos auditivos Marvel. O Marvel também oferece transmissão de qualidade sonora estéreo para música, vídeos, e-books, podcasts e muito mais.

Conecta-se a smartphones, TV e muito mais

ao som

Aplicativos inteligentes

O Phonak Bolero Marvel também possui a tecnologia exclusiva AirStream™ para transmissão de alta qualidade sonora a partir de qualquer TV e sistema estéreo.⁵ Seus clientes podem desfrutar de programas de TV e filmes com o Phonak TV Connector, uma solução "plugue e use" simples. É como usar fones de ouvido sem fio – talvez ainda melhor, pois os aparelhos auditivos Marvel agora podem distinguir entre sinais transmitidos de música e fala, e ajustar automaticamente para uma qualidade sonora otimizada.

Principais destaques:

- Conecta-se a smartphones – iOS e Android
- Conecta-se a vários dispositivos eletrônicos de uso diário
- Aparelhos auditivos usados como fones de ouvido estéreo sem fio
- Tempo de transmissão extralongo graças à AirStream Technology

A tecnologia Roger™ melhora o desempenho auditivo no ruído e à distância.⁶ O Phonak Bolero Marvel possui o RogerDirect™, que possibilita a tecnologia Roger ser transmitida diretamente aos aparelhos auditivos Marvel sem precisar se conectar a um receptor externo.

Principais destaques:

- Marvel e Roger, as soluções ideais para situações auditivas desafiadoras
- Desenvolvido para melhorar a compreensão de fala em situações de ruído e à distância
- Soluções discretas e atrativas

Apps – Absolutamente maravilhoso!

A nova plataforma de serviços digitais da Phonak é dedicada a melhorar as necessidades auditivas pessoais dos usuários. Através do myPhonak app, seus usuários podem escolher compartilhar informações com você, você pode personalizar suas experiências auditivas em tempo real e com a função avançada de controle remoto, seus usuários podem ajustar as configurações do aparelho auditivo às suas necessidades individuais.

Principais destaques:

- Ajuste e personalização do som em tempo real
- Acesso remoto em tempo real

Chamadas telefônicas podem ser desafiadoras, especialmente com ruído de fundo. Com o aplicativo myCall-to-Text app da Phonak, os usuários podem ouvir as conversas nos aparelhos auditivos Marvel e conseguem ler na tela o que a pessoa do outro lado do telefone diz em tempo real. Uma versão gratuita do myCall-to-Text app encontra-se disponível. Experimente agora!

Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos que somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem o seu sucesso social e emocional. Life is on.

www.phonakpro.com

Phonak Bolero™ Marvel



Amor ao primeiro som

Para obter mais informações, visite www.phonakpro.com

Com o Phonak Bolero Marvel, apresentamos aparelhos auditivos multifuncionais capazes de fazer você amar ao primeiro som

Amor ao primeiro som...todos os dias!

Quando dizemos amor ao primeiro som, não se trata apenas da primeira vez que seus usuários experimentam o Phonak Bolero Marvel, mas todas as vezes! No primeiro momento em que eles colocam os aparelhos auditivos Marvel, eles podem esperar uma **qualidade sonora incomparável**.

Essa nova geração da tecnologia Phonak reconhece e se adapta automaticamente para corresponder com precisão a uma quantidade de situações auditivas sem precedentes¹. Com o AutoSense OS™ 3.0 e a Binaural VoiceStream Technology™ em todos os modelos, os seus usuários podem desfrutar de uma melhor compreensão da fala no ruído e redução do esforço auditivo.

Principais destaques:

- Qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste²
- Melhor compreensão da fala no ruído³
- Redução do esforço auditivo no ruído⁴
- Eleito o melhor em qualidade sonora na transmissão sem fio⁵

O poder da tecnologia recarregável

A Phonak foi pioneira em recarregabilidade no setor de aparelhos auditivos com a introdução de baterias recarregáveis de íons de lítio. Os aparelhos auditivos Marvel também possuem esta tecnologia, tornando possível recarga mais rápida e baterias com maior vida útil. Eles ligam automaticamente quando são removidos do carregador e desligam quando são colocados de volta no estojo de carregamento. Seus usuários podem usufruir de audição e transmissão ilimitadas ao longo do dia.

Principais destaques:

- Facilidade de utilização – não há mais problemas com baterias descartáveis
- Dia inteiro de audição, incluindo transmissão sem fio ilimitada
- Recarga super-rápida
- Bateria projetada para durar 6 anos

Som rico e claro

Amor primeiro


Modelos recarregáveis

Descrição do produto

		Bolero M-M Bolero M-M Trial M90/M70/M50/M30	Bolero M-PR Bolero M-PR Trial M90/M70/M50/M30
Tamanho da bateria		312	
Botão multifunção		•	•
Bobina de indução		•	•
Bluetooth®		•	•
Nanorrevestimento		•	•
Classificação IP		IP68 ⁷	IP68 ⁷
Dimensões	C x L x P	31,3 x 14,1 x 7,3 (1,23 x 0,56 x 0,29")	36,7 x 16,4 x 8,5 (1,44 x 0,65 x 0,33")
	Peso	2,18 g/0,077 oz	3,71 g/0,131 oz
Tempos de carregamento ⁸	0% a 100%		3 h
	0 a 80%		1,5 h
	Ajuste de 30 min		10 min

		Tubo fino 4.0	HE11 680	Tubo fino 4.0	HE11 680
Nível de Saída Máxima (dB SPL)	Acoplador de 2cc	122	128	127	130
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2cc	58	63	60	66
Faixa de frequência (Hz)		<100 - >6500	<100 - >8000	<100 - >7000	<100 - >6800
Consumo de energia (mA)		1,5	1,6		

Faixa de adaptação

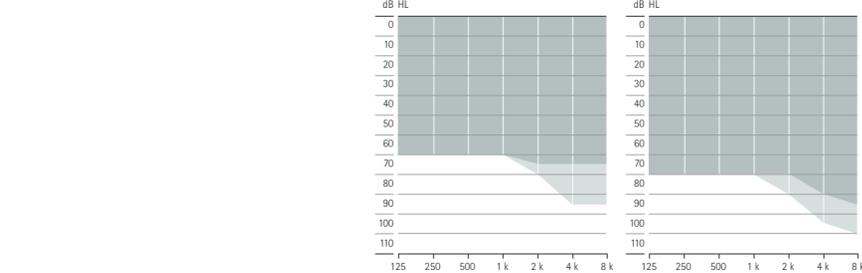

■ Tubo fino 4.0
■ HE11 680

Perda auditiva leve até moderada a severa, todas as configurações audiométricas

Perda auditiva leve a severa, todas as configurações audiométricas

Cores de caixa



⁷ IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e à poeira. Resistiu a uma submersão contínua a 1 metro de água durante 60 minutos e a 8 horas de exposição à câmara de poeira, tal como definido em IEC60529.
⁸ O tempo de carregamento real depende da vida útil restante da bateria, mas não deverá exceder 3 horas.

Níveis de desempenho

AutoSense OS™ 3.0	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30	Características	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
Situações silenciosas	•	•	•	•	UltraZoom	•	•	•	•
Fala no ruído	•	•	•	•	Aumento da relação sinal/ruído	•	•	•	
Conforto no ruído	•	•	•		DuoPhone	•	•	•	
Música	•	•			SoundRecover2	•	•	•	•
Fala no ruído forte ⁹	•				Ajuste das preferências do usuário	•	•	•	•
Fala no carro	•				Real Ear Sound	•	•	•	
Conforto no eco	•				Canais de ajuste fino	20	16	12	8
Fala para mídia + mic	•	•	•	•	WhistleBlock	•	•	•	•
Música para mídia + mic	•	•	•	•	NoiseBlock	•	•	•	•
Programas adicionais					WindBlock	•	•		
Máx. de programas adicionais	3	3	3	3	EchoBlock	•			
Conforto no eco	•				SoundRelax	•	•		
Fala no ruído forte	•	•			QuickSync	•	•	•	•
Fala em 360°	•	•			Ventilação acusticamente otimizada	•	•	•	•
Fala no ruído	•	•	•	•	Tinnitus Balance	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•	auto Acclimatization	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	•	Equilíbrio ambiental	•	•	•	•
Música	•	•	•	•	RogerDirect™	•	•	•	•
Telefone acústico	•	•	•	•	Configuração do Roger e direcionalidade	•	•	•	
Programa personalizado	•	•	•	•					
Programas de transmissão									
RogerDirect + mic	•	•	•	•					
PartnerMic + mic	•	•	•	•					
Chamada telefónica + mic	•	•	•	•					

Ajuste

	Bolero M-M Bolero M-M Trial M90/M70/M50/M30	Bolero M-PR Bolero M-PR Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.1 ou superior	6.1 ou superior
Noahlink Wireless	•	•

¹ Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new and enhanced automatic operating system. Phonak Insight, retirado de www.phonakpro.com/evidence, acessado em 17 de outubro de 2018.
² Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, retirado de www.phonakpro.com/evidence, acessado em 17 de outubro de 2018.
³ Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, retirado de <http://www.phonakpro.com/evidence>, acessado em 26 de fevereiro de 2019.
⁴ Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom. Phonak Field Study News, retirado de www.phonakpro.com/evidence, acessado em 17 de outubro de 2018.
⁵ Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer. Phonak Field Study News, retirado de www.phonakpro.com/evidence, acessado em 17 de outubro de 2018.
⁶ Thiabodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
IOS é uma marca comercial da Cisco, Inc.
Android é uma marca comercial da Google, Inc.

Vedação acústica

Saída de som		
	Gancho	Com filtro (HE11 680) transparente
	Tubo fino 4.0	Disponível para os lados direito e esquerdo com cinco comprimentos diferentes (00,0,1,2,3)
Peça para o tubo fino		
	Oliva	Oliva mini Oliva aberta Disponível em três tamanhos (S, M, L) Oliva ventilada Disponível em três tamanhos (S, M, L) Oliva Power Disponível em três tamanhos (S, M, L)
	microMolde	Acrílico Silicone Titânio
Peça para o gancho		
	Molde da orelha	
	Oliva universal	

Phonak Bolero M Trial™

Os novos aparelhos auditivos Phonak Bolero M Trial podem ser rapidamente configurados no nível de desempenho desejado a fim de atender às suas recomendações. Isto permite que você proporcione ao seu usuário a solução auditiva ideal logo na primeira consulta ou ofereça uma substituição quando o aparelho auditivo do usuário estiver sendo consertado.

Phonak Charger BTE RIC

Para carregar os aparelhos auditivos recarregáveis Bolero Marvel e Audéo Marvel O carregador inclui um espaço para guardar moldes de orelha maiores, com encaixes permitindo que dois aparelhos auditivos sejam recarregados simultaneamente, uma entrada USB-C e uma luz indicadora.



Versões do Phonak Bolero Marvel Bluetooth®

Chamadas diretas/transmissão de áudio
Tecnologia Bluetooth® 4.2 sem fio e a maioria dos telefones mais antigos com Bluetooth

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Portfólio de comunicação sem fio

	Bolero M-M Bolero M-M Trial M90/M70/M50/M30	Bolero M-PR Bolero M-PR Trial M90/M70/M50/M30
Acessório sem fio		
	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic™	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger™		
	Microfones Roger™	•
App		
	myPhonak	•
	Phonak Guide	•
	myCall-to-Text	•

Para obter mais informações sobre o Bolero Marvel, visite o site www.phonakpro.com/bolero marvel
Para obter mais informações sobre microfones Roger, visite o site www.phonakpro.com/roger
Para obter mais informações sobre os aplicativos Phonak, visite o site www.phonakpro.com/smartapps