

Phonak Naída™ Marvel



Amor ao primeiro som

Para obter mais informações, visite www.phonakpro.com

Com o Phonak Naída Marvel, apresentamos aparelhos auditivos multifuncionais capazes de fazer você amar ao primeiro som

Quando dizemos amor ao primeiro som, não se trata apenas da primeira vez que seus pacientes experimentam o Phonak Naída Marvel, mas todas as vezes! Desde o primeiro momento em que eles colocam os aparelhos auditivos, eles podem esperar um desempenho auditivo incomparável.

Essa nova geração da tecnologia Phonak reconhece e se adapta automaticamente para responder com precisão a uma quantidade de situações auditivas sem precedentes¹. Com o AutoSense OS™ 3.0 e o Binaural VoiceStream Technology™, os usuários podem desfrutar de uma melhor recuperação da memória no ruído e redução do esforço auditivo no ruído².


Principais destaques:

- Melhor compreensão de fala no ruído com o Roger³
- Redução do esforço auditivo no ruído*²
- Melhor recuperação da memória no ruído*²
- O primeiro aparelho auditivo superpotente do mundo com classificação de sinais de áudio transmitidos sem fio¹

Confiável

O Naída é o aparelho auditivo mais confiável e potente⁴. O Phonak Naída Marvel oferece, de forma confiável, a potência necessária para fornecer audibilidade para uma perda auditiva severa a profunda. Desde o lançamento do nosso primeiro aparelho auditivo potente em 1978, temos criado continuamente soluções auditivas que foram projetadas para proporcionar uma vida melhor às pessoas. Desenvolvido com o já comprovado Phonak Marvel, o novo Naída M-SP incorpora um aparelho auditivo com tecnologias de desempenho fundamentais dedicadas que fornecem de forma confiável a potência necessária para lidar com a perda auditiva dos pacientes.

Pessoas com perda auditiva severa a profunda dependem de seus aparelhos auditivos e precisam de uma solução que realmente corresponda às expectativas. A caixa (para BTEs) robusta permite que os usuários continuem a realizar suas atividades diárias com a tranquilidade de que os seus aparelhos auditivos funcionarão de forma confiável e que estarão à altura até mesmo nas situações auditivas mais complicadas.

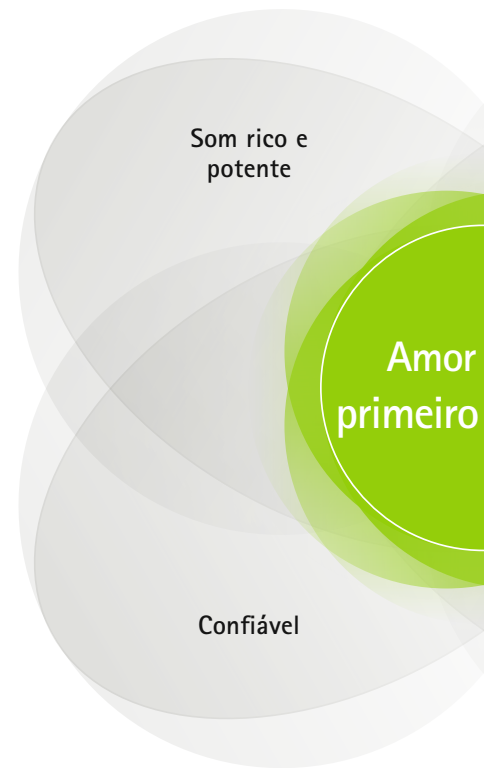


Descrição do produto



Naída M-SP
Naída M-SP Trial
 M90/M70/M50/M30

Tamanho da bateria		13
Botão multifunção		•
Bobina de indução		•
Bluetooth®		•
Nanorrevestimento		•
Classificação IP		IP68 ⁵
Dimensões	C x L x P	40,0 x 16,9 x 8,5 (1,57 x 0,67 x 0,33)
	Peso	4,4 g/0,155 oz
		HE11 HE11 680
Saída máx. (dB NPS)	Acoplador de 2cc	139 133
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2cc	81 75
Faixa de frequência (Hz)		<100 - >5000 <100 - >5000
Consumo de bateria (mA)		2,1 2,0

Faixa de adaptação

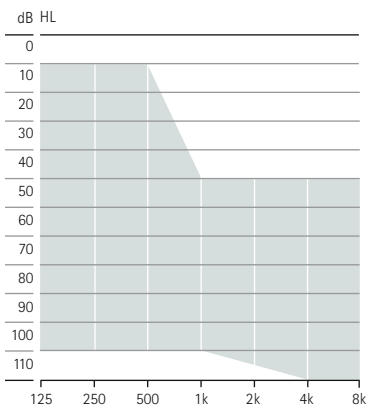

Perda auditiva moderada a profunda,
 todas as configurações audiométricas

■ HE11 680

Opções de cores



P1
Bege praia



P4
Castanho



P6
Prata



P7
Grafite



P8
Preto veludo

Níveis de desempenho

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense OS 3.0				
Situações silenciosas	•	•	•	•
Fala no ruído	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	
Música	•	•		
Fala no ruído forte	•			
Fala no carro	•			
Conforto no eco	•			
Transmissão sem fio de fala + mic	•	•	•	•
Transmissão sem fio de música + mic	•	•	•	•
Programas adicionais				
Máx. de programas adicionais	3	3	3	3
Conforto no eco	•			
Fala no ruído forte	•	•		
Fala em 360°	•	•		
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Telefone acústico	•	•	•	•
Programa personalizado	•	•	•	•
Programas de transmissão sem fio				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Chamada telefônica + mic	•	•	•	•

Características	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
UltraZoom	•	•	•	•
Aumento da relação sinal/ruído	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Ajuste das preferências do usuário	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Canais de ajuste fino	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Ventilação acusticamente otimizada	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Aclimatização	•	•	•	•
Balanceamento ambiental	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Configuração Roger e direcionalidade	•	•	•	

Ajuste

Naída M-SP
Naída M-SP Trial
M90/M70/M50/M30

Phonak Target	6.2 ou superior
Noahlink Wireless	•
Noahlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Vedação acústica

Saída de som	Gancho	Gancho com filtro (HE11 680) ou gancho sem filtro (HE11), transparente	
	Tubo fino 4.0	Disponível para os lados direito e esquerdo com cinco comprimentos diferentes (00,0,1,2,3)	
Peça para o tubo fino	Oliva	Oliva mini	
		Oliva aberta	disponível em três tamanhos (S, M, L)
		Oliva ventilada	disponível em três tamanhos (S, M, L)
		Oliva Power	disponível em três tamanhos (S, M, L)
	microMolde	Acrílico	
		Silicone	
Peça para o gancho	Molde		
	Oliva universal		

Phonak Trial™

Os novos aparelhos auditivos Phonak Naída M Trial podem ser rapidamente configurados no nível de desempenho desejado a fim de atender às suas recomendações. Isto permite que você proporcione ao seu paciente a solução auditiva ideal logo no primeiro atendimento ou ofereça uma substituição quando o aparelho auditivo do usuário estiver sendo consertado.

- 1 Rodrigues, T., & Liebe, S. (2018). AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, retirado de www.phonakpro.com/evidence, acessado em 19 de fevereiro de 2020.
- 2 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort: an EEG study. Artigo em elaboração. Previsto para o início de 2020.
- 3 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. *American Journal of Audiology*, 23(2), 201-210.
- 4 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Entre em contato através do e-mail marketinsight@phonak.com se estiver interessado em receber mais informações. Com base na Customer Satisfaction Survey de 2017.
- 5 IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e à poeira. Resistiu a uma submersão contínua a 1 metro de água durante 60 minutos e a 8 horas de exposição à câmara de poeira, tal como definido na norma IEC60529.

Versões Bluetooth® do Phonak Naída Marvel

Chamadas diretas/transmissão sem fio de áudio

Tecnologia Bluetooth® 4.2 sem fio e a maioria dos telefones mais antigos com Bluetooth

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Portfólio de comunicação sem fio

		Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Acessório sem fio	TV Connector	•
Roger	Microfones Roger	•
Aplicativo	myPhonak	•

Para obter mais informações sobre o Phonak Naída Marvel, visite o site www.phonakpro.com/naidamarvel

Para obter mais informações sobre os microfones Roger, visite o site www.phonakpro.com/roger

Para obter mais informações sobre os aplicativos Phonak, visite o site www.phonakpro.com/smartapps

O que torna o Phonak Marvel ainda mais maravilhoso?

O Phonak Naída Marvel é o primeiro BTE superpotente do mundo com o recurso de chamadas em modo mãos livres que transmite sons sem fio diretamente de smartphones iOS, Android ou outros dispositivos com Bluetooth, para os aparelhos auditivos. Seus pacientes podem desfrutar de chamadas telefônicas em modo mãos livres. Além disso, as notificações do telefone podem ser ouvidas pelos aparelhos auditivos. O Naída também oferece transmissão de qualidade sonora estéreo para música, vídeos, e-books, podcasts e muito mais.



O Naída possui o AirStream™ Technology para transmitir o som de qualquer TV e sistema estéreo. Seus usuários podem desfrutar de programas de TV e filmes com o TV Connector, uma solução "plugue e use" simples. É como usar fones de ouvido sem fio – talvez ainda melhor, pois os aparelhos auditivos Marvel agora podem distinguir entre sinais transmitidos de música e fala e se ajustar automaticamente para proporcionar uma qualidade sonora otimizada.

Principais destaques:

- Conecta-se a smartphones – iOS e Android
- Conecta-se a vários dispositivos de áudio de uso diário
- Aparelhos auditivos usados como fones de ouvido estéreo sem fio
- Maior tempo de transmissão graças ao AirStream Technology

A tecnologia Roger™ melhora o desempenho auditivo no ruído e à distância.³ O Phonak Naída Marvel possui o RogerDirect™ que possibilita que a tecnologia Roger seja transmitida diretamente aos aparelhos auditivos Phonak Marvel sem a necessidade de conectar um receptor externo.

Principais destaques:

- Phonak Marvel e Roger, as soluções ideais para situações auditivas desafiadoras
- Desenvolvido para melhorar a compreensão de fala em situações de ruído e à distância
- Soluções discretas e atrativas

Absolutamente maravilhoso!

A nova plataforma de serviços digitais da Phonak é dedicada a melhorar as necessidades auditivas pessoais dos usuários. Através do **myPhonak app**, seus usuários podem escolher compartilhar informações com você, você pode personalizar suas experiências auditivas em tempo real e com a função Remote Control avançada seus usuários podem ajustar as configurações do aparelho auditivo às necessidades individuais.

Principais destaques:

- Ajuste e personalização do som em tempo real
- Acesso remoto em tempo real

Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem o seu sucesso social e emocional. Life is on.

www.phonakpro.com