


Phonak

Roger™ Table Mic II iN

Roger Table Mic II iN es un micrófono especializado para adultos que en el trabajo participan en diversos tipos de reuniones. Selecciona la persona que está hablando en ese momento y cambia de orador automáticamente. Se pueden conectar varios micrófonos en una mesa para crear una red de trabajo, convirtiéndolos así en la solución ideal para cualquier contexto de reunión. También puede transmitir el sonido de dispositivos multimedia, como el ordenador.

Datos técnicos

Tipo	Micrófono Roger
Dimensiones (Diám. x Al.)	69 x 69 x 14 mm (2,7 x 2,7 x 0,6 pulgadas)
Peso	103 g (3,63 onzas)
Opciones de color	Champán
Accesorios incluidos	Fuente de alimentación con cable de carga USB, cable de audio, adaptador Cinch y funda
Condiciones de funcionamiento	De 0 a +45 °C (de +32 a +113 °F) Humedad relativa de <90 % (sin condensación)
Condiciones de transporte y almacenamiento	De -20 a +60° C (de -4 a +140 °F) Humedad relativa de <95 % durante un periodo largo de tiempo

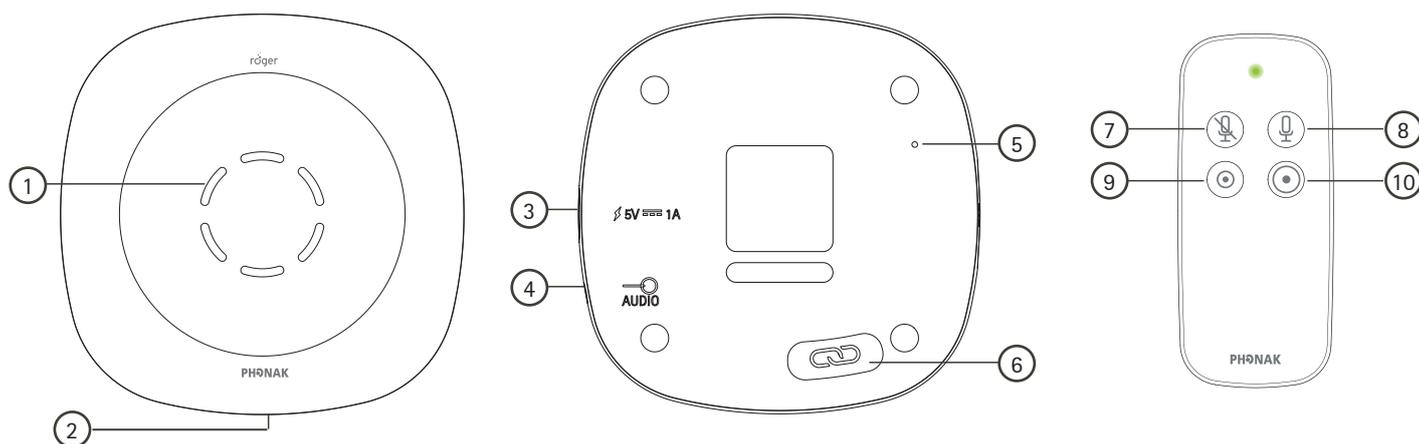

Descripción del dispositivo

1	Indicadores luminosos y del micrófono	6	Botón de conexión
2	Botón de encendido/apagado	7	Desactivar sonido
3	Conexión micro USB	8	Activar sonido
4	Entrada de audio	9	Rango de selección corto
5	Botón de instalación (solo para audiólogos)	10	Rango de selección largo



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Funciones

- Tecnología MultiBeam para mejorar la comprensión en situaciones con ruido
- Red MultiTransmisor para una cobertura sencilla de reuniones grandes
- Mando a distancia para silenciar y ajustar el alcance de captación
- Entrada de audio para conexión a dispositivos multimedia
- 16 horas de tiempo de funcionamiento

Instalación de Roger

Roger Table Mic II iN contiene dos receptores Roger que pueden instalarse en un par (dos) de audífonos con RogerDirect™ sin conectar un receptor con auricular externo.

Características del micrófono

Número de micrófonos	3
Modos del micrófono	Modo de mesa

Información sobre radio

Tecnología de Streaming	Tecnología Roger
Rango de frecuencia	Banda ISM de 2,4 GHz incluyendo salto de frecuencia adaptativo
Potencia de RF	Máx. 70 mW
Alcance de transmisión (línea de visión clara, campo libre)	Hasta 80 metros/260 pies (para audífonos con RogerDirect) Hasta 40 metros/130 pies (para el receptor Roger)

Información sobre audio

Entrada de audio	Analógica
Ancho de banda de audio	De 100 Hz a 7,3 kHz

Fuente de alimentación

Tipo	CC, estabilizada
Tensión primaria	100-240 VCA
Tensión secundaria	5 V CC
Corriente máx.	1,0 A
Conector	micro-USB
Nota importante	Utilice únicamente la fuente de alimentación USB original Phonak de 5 V CC, >500 mA

Pila

Tipo	Polímero de litio
Capacidad	1000 mAh
Tensión	3,7 V
Tiempo de funcionamiento	16 horas

Compatibilidad del receptor

Receptores Roger compatibles	Todos los receptores Roger personales, excepto los SoundField
Máx. de receptores conectados	Ilimitado

Compatibilidad de micrófonos (Red MultiTransmisor)

Micrófonos Roger compatibles	Roger Table Mic II, Roger Table Mic II iN, Roger Select™, Roger Select™ iN, Roger Pen™, Roger Pen™ iN, Roger EasyPen y Roger Clip-On Mic
Máx. de micrófonos conectados	10

Normativas

Europa	EN 300 328, EN 301 489, EN 60950-1, IEC/EN 62479
Canadá	RSS-247, RSS-102
Japón	ARIB-T66
Estados Unidos	CFR 47, parte 15.231, parte 15.247, FCC, boletín OET, n.º 65