

# フォナック スカイL.

## プロダクトインフォメーション

フォナック スカイLミティは、軽度から重度の難聴の方を対象にした耳かけ型補聴器の総合ポートフォリオです。

スカイL補聴器は、フォナック スマートスピーチテクノロジーを搭載し、当社最先端のプラットフォームであるフォナックルミティを利用してことばの理解の向上を求めている小児顧客に適しています。



# 製品概要



スカイ L-PR  
スカイ L-PR トライアル  
L90/L70/L50/L30





スカイ L-UP  
スカイ L-UP トライアル  
L90/L70/L50/L30

電池サイズ		内蔵充電式		675
LED 小児用パターン		●		●
T コイル				●
クロス L の互換性		●		
Bluetooth® <sup>1</sup>		●		●
ナノ コーティング		●		●
国際保護等級 IP		IP68 <sup>2</sup>		IP68 <sup>2</sup>
サイズ	縦 x 幅 x 奥行き	36.7 x 16.4 x 8.5 mm (1.44 x 0.64 x 0.33")		42.6 x 18.8 x 8.6 mm (1.68 x 0.74 x 0.34")
	重さ	3.68 g		4.60 g
充電時間 <sup>3</sup>	0%~100%	3時間		
	0%~80%	1.5時間		
	30分フィッティング	10分		
		HE11 680	スリムチューブ4.0	HE11
最大出力音圧(dB SPL)	2cc カプラデータ	130	129	141
最大利得(dB)	2cc カプラデータ	68	69	84
帯域幅(Hz)		< 100 - > 5,700	< 100 - > 7,100	< 100 - > 4,700
使用電流(mA)				3.3
				2.8

## フィッティングレンジ

■ DSL 小児用フィッティングレンジ  
■ APD/NAL フィッティングレンジ

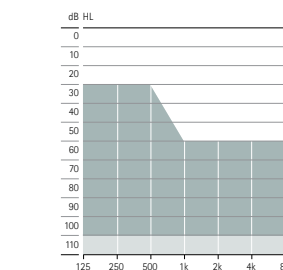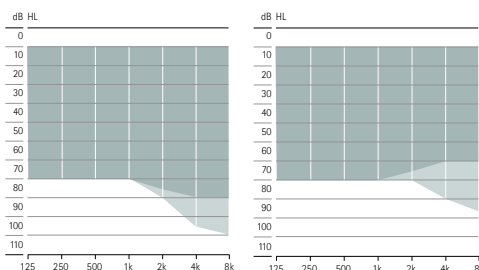

「軽度」から「中等度～高度」難聴、  
すべての聴力タイプ

高度重度難聴、すべての聴力タイプ

<sup>1</sup> Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc. が所有する登録商標です。Sonova AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

<sup>2</sup> IP68 は、補聴器が防水防塵であることを示します。水深1mの淡水に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています (IEC60529規格による)。

<sup>3</sup> 実際の充電時間は、電池の寿命によって変わり、温度条件の影響を受ける場合があります。

# パフォーマンスレベル

オートセンススカイOS 5.0	プレミアムクラス L90	アドバンスクラス L70	スタンダードクラス L50	エッセンシャルクラス L30
非常に騒がしい中でのことば	●			
車の中でのことば	●			
反響する環境での快適性	●			
音楽	●	●		
騒音下での快適性	●	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
メディアことば+マイク	●	●	●	●
メディア音楽+マイク	●	●	●	●
<b>追加プログラム</b>				
最大追加プログラム数	4	4	4	4
反響する環境での快適性	●			
非常に騒がしい中でのことば	●	●		
全方向(360°)からのことば	●	●		
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●
電話	●	●	●	●
カスタム プログラム	●	●	●	●
Tコイル+マイクを介した電話 <sup>1</sup>	●	●	●	●
公共用のTコイル+マイク <sup>1</sup>	●	●	●	●
<b>ストリーミングプログラム</b>				
ロジャー ダイレクト+マイク	●	●	●	●
フォナック パートナーマイク+マイク	●	●	●	●
通話+マイク	●	●	●	●

機能	プレミアムクラス L90	アドバンスクラス L70	スタンダードクラス L50	エッセンシャルクラス L30
スピーチセンサー	●			
スピーチ エンハンサー	●			
ステレオズーム 2.0	●	●		
ダイナミックノイズキャンセル	●	●		
モーション センサー ヒアリング <sup>2</sup>	●	●	●	
ロジャー ダイレクト	●	●	●	●
エコブロック	●			
タップコントロール <sup>2</sup>				
- Siri/Google アシスタント		●		
- ストリーミングの一時停止/再開	●	●		
- 電話通話の応答/終了	●	●		
サウンドリラックス	●	●		
デュオフォン	●	●	●	
リアルイヤーサウンド	●	●	●	
ロジャーと指向性の設定	●	●	●	●
ウルトラズーム	●	●	●	●
広帯域ブースター <sup>1</sup>	●	●	●	●
ウインドブロック	●	●	●	●
ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
自動順応マネージャ	●	●	●	●
環境バランス	●	●	●	●
サウンドリカバー <sup>2</sup>	●	●	●	●
ホイッスルブロック	●	●	●	●
ノイズブロック	●	●	●	●
クイックシンク	●	●	●	●
AOV	●	●	●	●
微調整チャンネル	20	20	16	12

スマートスピーチテクノロジー

<sup>1</sup>フォナック スカイ L-UP のみで使用可  
<sup>2</sup>フォナック スカイ L-PR のみで使用可

## フィッティング

	スカイ L-PR スカイ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-PR スカイ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30
フォナック ターゲット	9.0以降	9.0以降
ノアリンク ワイヤレス/ノアリンク ワイヤレス2	●	●
ノアリンク		●
HI-PRO、HI-PRO2		●

# 音響カプリング

		スカイ L-PR スカイ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-UP スカイ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	
音口	標準イヤフック	ダンパー付き(HE11 680)、クリアと他に小児用の6色	●	
		ダンパーなし(HE 11)、クリアのみ	●	
	いたずら防止付きイヤフック (ミニ)	ダンパー付き(HE11 680)、クリアと他に小児用の6色	●	
		ダンパーなし(HE 11)、クリアのみ	●	
	スリムチューブ4.0	左右の異なる5種類の長さ(00、0、1、2、3)	●	
スリムチューブ用耳せん (イヤチップ)	耳せん	キャップドーム耳せん	●	
		オープン型耳せん	3つのサイズ(S、M、L)で利用可	●
		ベント付きドーム耳せん	3つのサイズ(S、M、L)で利用可	●
		パワー型耳せん	3つのサイズ(S、M、L)で利用可	●
		スリムチップ	アクリル	●
		シリコン	●	
イヤフック用耳せん (イヤチップ)	イヤモールド		●	

## ハウジングとイヤフックの色

### ハウジング



H0  
ベージュ



P1  
サンドベージュ



P3  
サンダルウッド



P4  
チェストナット



P5  
シャンパン



P6  
シルバークレー



P7  
グラファイト  
グレー



P8  
ベルベット  
ブラック



M6  
ラバレッド



M7  
ブルー  
オーシャン



M8  
マジェスティ  
パープル



Q2  
エレクトリック  
グリーン



Q3  
カリビアン  
パイレーツ



T3  
プレシャス  
ピンク

### イヤフック



R1  
グリーン



R2  
イエロー



R3  
ピンク



R4  
オレンジ



Q6  
ブルー



Q7  
パープル



13  
クリア

## フォナック スカイ L トライアル

フォナック スカイ L トライアル補聴器は、専門家の推奨するパフォーマンスレベルに適合するように、目的のクラスに速やかに設定できるようになっています。初回予約時には最適な聞こえのソリューションで装用者をフィッティングでき、補聴器を修理に出している間の代替品を提供できます。スカイ L トライアルデバイスにはロジャー受信機が事前にインストールされており、簡単にデモンストレーションやロジャー マイクロホンの試用を行うことができます。

# フォナック スカイ L-PR 充電器オプション

## フォナック チャージャー Combi BTE / フォナック チャージャー Combi BTE 2

スカイ L-PR は従来の機能をすべて搭載し、充電式の利点もあります。顧客は、ストリーミング実行時でも一日中の聞こえを楽しむことができます\*。

\* 10時間のロジャーまたは音声ストリーミングを含む16時間の電池駆動時間。



# フォナック スカイ L Bluetooth® バージョン

**ダイレクト コール/音声ストリーミング** Bluetooth 4.2のワイヤレステクノロジーと、多くの旧式 Bluetooth 電話に対応

# ワイヤレスコミュニケーションポートフォリオ

	スカイ L-PR スカイ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-UP スカイ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30
<b>ワイヤレスアクセサリー</b>		
テレビコネクター	•	•
フォナック パートナー マイク	•	•
フォナック リモート コントロール	•	•
<b>ロジャー</b>		
ロジャー マイクロホン	•	•
<b>アプリ</b>		
ロジャー マイクロホン	•	•

詳細については、[www.phonak.com/sky-lumity](http://www.phonak.com/sky-lumity) を参照してください。

ロジャー マイクロホンの詳細については、[www.phonak.com/roger-for-education](http://www.phonak.com/roger-for-education) をご覧ください。

マイフォナック ジュニアの詳細については、[www.phonak.com/myphonak-junior](http://www.phonak.com/myphonak-junior) をご覧ください。

# life is on

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開くことによって、人々の人生を豊かにする取り組みに熱意を傾けてきました。私たちは創業当初から「良い聞こえは健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」という信念に基づき活動してきました。聞こえは、社会的・感情的、認知的、身体的なウェルビーイングに深くつながっています。私たちは、現在もそしてこれからも聴覚専門家とともに、「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるよう力を注いでまいります。

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0697-17/V1.00/2023-06/NIG © 2023 Sonova AG All rights reserved