

フォナック ナイーダ ルミティ。

プロダクトインフォメーション

フォナック ナイーダ ルミティは、軽度から重度の難聴用の包括的な BTE ポートフォリオです。

フォナック スマートスピーチテクノロジーを搭載し、当社の最先端プラットフォームであるフォナック ルミティを利用した高機能やパワフルな補聴器を求めるお客様に最適なソリューションです。



製品概要



ナイーダ L-UP
ナイーダ L-UP トライアル
L90/L70/L50/L30




ナイーダ L-PR
ナイーダ L-PR トライアル
L90/L70/L50/L30

電池の種類		PR44(675)	リチウムイオン電池
T コイル		●	
クロス L の互換性			●
Bluetooth®		●	●
ナノコーティング		●	●
国際保護等級 IP		IP68 ¹	IP68 ¹
サイズ	高さ x 幅 x 奥行き	42.6 x 18.8 x 8.6 mm	36.7 x 16.4 x 8.5 mm
	重さ	4.60 g	3.68 g
充電時間 ²	0%~100%		3時間
	0%~80%		1.5時間
	30分フィッティング		10分


		HE11	HE11 680	HE11 680	スリムチューブ 4.0
最大出力音圧 (dB SPL) (OSPL90)(+3 dB以下)	2cc カプラデータ	141	134	130	129
最大音響利得 (dB) (ピーク)(+3 dB以下)	2cc カプラデータ	84	78	68	69
帯域幅 (Hz)		< 200 - > 4,600		< 200 - > 5,100	
使用電流 (mA)		3.3			

フィッティングレンジ

■ スリムチューブ 4.0
■ HE11 680

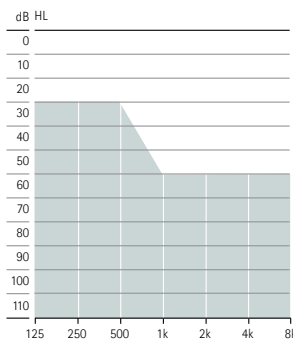

高度～重度難聴

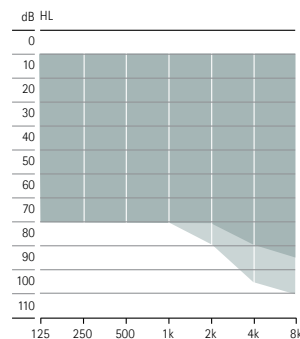

軽度～高度難聴

ハウジング カラー



H0
ベージュ



P1
サンド
ベージュ



P3
サンダル
ウッド



P4
チェスト
ナット



P5
シャンパン



P6
シルバー
グレー



P7
グラファイト
グレー



P8
ベルベット
ブラック

¹ IP68 は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深1mの淡水に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しなかったことを示しています (IEC60529規格による)。

² 実際の充電時間は、電池残量によって異なり、温度条件の影響を受ける場合があります。

Bluetooth® のロゴ文字およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。Sonova AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

パフォーマンスレベル

	プレミアム クラス L90	アドバンス クラス L70	スタン ダード クラス L50	エッセ ンシャル クラス L30
オートセンス OS 5.0				
非常に騒がしい中でのことば	●			
車の中でのことば	●			
反響する環境での快適性	●			
音楽	●	●		
雑音下での快適性	●	●	●	
騒がしい中でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
メディアことば+マイク	●	●	●	●
メディア音楽+マイク	●	●	●	●
追加プログラム				
最大追加プログラム数	4	4	4	4
反響する環境での快適性	●			
非常に騒がしい中でのことば	●	●		
全方向(360°)からのことば	●	●		
騒がしい中でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●
電話	●	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●	●
Tコイル±マイクを介した電話 ¹	●	●	●	●
パブリックTコイル±マイク ¹	●	●	●	●
ストリーミングプログラム				
ロジャー ダイレクト+マイク	●	●	●	●
フォナック パートナー マイク+ マイク	●	●	●	●
通話+マイク	●	●	●	●

フォナックスマートスピーチ
テクノロジー

機能	プレミアム クラス L90	アドバンス クラス L70	スタン ダード クラス L50	エッセ ンシャル クラス L30
スピーチセンサー	●			
スピーチエンハンサー	●			
ステレオズーム 2.0	●	●		
ダイナミックノイズキャンセル	●	●		
モーションセンサーヒアリング ²	●	●	●	
ロジャーダイレクト	●	●	●	●
エコブロック	●			
タップコントロール ²				
- Siri/Google アシスタント	●	●		
- ストリーミングの一時停止/再開	●	●		
- 通話の応答/終了	●	●		
サウンドリラックス	●	●		
デュオフォン	●	●	●	
リアルイヤーサウンド	●	●	●	
ウルトラズーム	●	●	●	●
ロジャーおよび指向性設定	●	●	●	●
広帯域ブースター ¹	●	●	●	●
ヘルス機能 ²	●	●	●	●
ウインドブロック	●	●	●	●
ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
耳鳴りバランス ²	●	●	●	●
自動順応マネージャ	●	●	●	●
環境バランス	●	●	●	●
サウンドリカバー ²	●	●	●	●
ホイッスルブロック	●	●	●	●
ノイズブロック	●	●	●	●
クイックシンク	●	●	●	●
AOV	●	●	●	●
微調整チャンネル数	20	20	16	12

¹ フォナック ナイーダ L-UP のみで使用可能
² フォナック ナイーダ L-PR のみで使用可能

フィッティング

	ナイーダ L-UP ナイーダ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイーダ L-PR ナイーダ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0以上	9.0以上
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	●	●
NOAHLink	●	
HI-PRO、HI-PRO2	●	

音響カプリング

			ナイーダ L-UP ナイーダ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイーダ L-PR ナイーダ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30
音口	イヤフック	ダンパー付き(HE11 680)	●	●
	イヤフック	ダンパーなし(HE11)	●	
	スリムチューブ4.0	左右の異なる5種類の長さ(00、0、1、2、3)		●
スリムチューブ用耳せん				●
(イヤチップ)	ドーム型耳せん	キャップ型		
		オープン型	3サイズ(S、M、L)から選択可能	●
		ベント付き	3サイズ(S、M、L)から選択可能	●
		パワー型	3サイズ(S、M、L)から選択可能	●
	スリムチップ	アクリル製		●
		シリコン製		●
フック用耳せん	既成耳せん		●	●
(イヤチップ)	イヤモールド		●	●

フォナック ナイーダ ルミティ トライアル

フォナック ナイーダ ルミティ トライアル補聴器は、聴覚専門家の推奨するパフォーマンスレベルに適合するよう、目的のクラスに速やかに設定できるようになっています。初回予約時にはもう最適な聞こえのソリューションで装用者のフィッティングができ、補聴器を修理に出している間の代替品としても提供できます。このナイーダ ルミティ トライアル補聴器にはロジャー受信機が事前にインストールされており、簡単にロジャーのデモンストレーションや試聴を行うことができます。

フォナック ナイダ L-PR 充電器

フォナック チャージャー Combi BTE*1

ナイダ L-PR はルミティの魅力がすべて備わっており、充電式の利点もあります。顧客は、ストリーミング実行時でも一日の聞こえを楽しむことができます*2。

*1 フォナック チャージャー Combi BTEは標準充電器です。オプションとしてチャージャー BTE RICもご利用いただけます。

*2 4時間の Bluetooth クラシック ストリーミングと4時間のテレビコネクター ストリーミングを含む16時間の期待動作時間。



フォナック ナイダ L Bluetooth® バージョン

ハンズフリー通話/音声ストリーミング

Bluetooth 4.2のワイヤレス テクノロジーと、多くの旧式 Bluetooth 電話に対応

ワイヤレスコミュニケーションポートフォリオ

	ナイダ L-UP ナイダ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイダ L-PR ナイダ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30
ワイヤレス アクセサリー		
テレビコネクターD	•	•
フォナック パートナー マイク	•	•
フォナック リモートコントロール	•	•
ロジャー		
ロジャー マイクロホン	•	•
アプリ		
マイフォナック アプリ	•	•
マイフォナック ジュニア アプリ	•	•

life is on

1947年以来、フォナックは新しい聴覚の世界を開拓し、生活の質を守ることに取り組んでいます。当社は、創業当時から、よりよい聞こえが人々のウェルビーイングに深く関係があり、人生を豊かにするために不可欠であると信じています。事実、聞こえは、社会・感情的、認知的、身体的なウェルビーイングの向上と関係があります。今後も、私たちは革新的な聞こえのソリューションの幅広いポートフォリオを提供するよう努めていきます。そして、聴覚専門家とともに、私たちは最も重要なこと、すなわち、ことばの理解の向上、人々の暮らしの向上、社会全体への積極的な影響に注力し続けています。

www.phonak.com



027-0699-17/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved