

귀걸이형 보청기 호환성 가이드

1. 루미티(Lumity), 파라다이스(Paradise), 마블(Marvel)

	이어피스 옵션	루미티				파라다이스		마블		
		스카이 L		나이다 L		나이다 P		스카이 M		나이다 M
		스카이 L-PR	스카이 L-UP	나이다 L-PR	나이다 L-UP	나이다 P-PR	나이다 P-UP	스카이 M-M 스카이 M-PR	스카이 M-SP	나이다 M-SP
① 이어후크 EarHook	이어몰드, 이어팁	HE11 680*	HE11 680 또는 HE11*	HE11 680	HE11 680 또는 HE11	HE11 680	HE11 680 또는 HE11	HE11 680	HE11 680 또는 HE11	HE11 680 또는 HE11
② 슬림튜브 SlimTube 4.0	RIC 돔, 슬림팁	●	X	●	X	●	X	●	X	X
③ 파워 슬림튜브 Power SlimTube 3.0	이어몰드	●	X	●	X	●	X	X	●	●

* HE11 680 : 댄퍼가 있는 후크 / HE11 : 댄퍼가 없는 후크

① 이어후크(EarHook)

- HE11 680과 HE11의 형태는 동일 (후크 내부에 댄퍼 유/무의 차이)




▲ 댄퍼: 필요에 따라 센터에서 제거 가능

- 이어피스 옵션: 이어몰드, 이어팁



② 슬림튜브(SlimTube 4.0)

- 일반적인 귀걸이형 튜브보다 얇아 눈에 덜 띄지만 출력이 낮음
- 길이 : 00,0,1,2,3

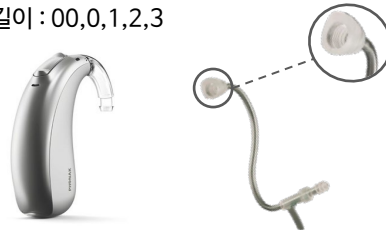

- 이어피스 옵션: RIC 돔, 슬림팁



③ 파워 슬림튜브(Power SlimTube 3.0)

- 슬림튜브(②)와 이어몰드가 결합된 형태
- 길이 : 00,0,1,2,3



- 이어피스 옵션: 이어몰드



2. 빌롱(Belong)

	이어피스 옵션	스카이 B				나이다 B	
		스카이 B-M	스카이 B-PR	스카이 B-SP	스카이 B-UP	나이다 B-SP	나이다 B-UP
① 이어후크 EarHook	이어몰드, 이어팁	HE10 680* 또는 HE10*	HE10 680 또는 HE10	HE11 680 또는 HE11	HE11 680 또는 HE11	HE11 680 또는 HE11	HE11 680 또는 HE11
② 슬림튜브 SlimTube 3.0	RIC 돔, 슬림팁	●	●	X	X	X	X
③ 파워 슬림튜브 Power SlimTube 3.0	이어몰드	X	X	●	●	●	●

* HE11 680 : 댄퍼가 있는 후크 / HE11 : 댄퍼가 없는 후크

① 이어후크(EarHook)

- HE10과 HE 11의 형태 차이(이어후크 결합 부분 확인)

[HE10 680 / HE10]

[HE11 680 / HE11]




Sky B-M, Sky B-PR




Sky B-SP, Sky B-UP,
Naida B-SP, Naida B-UP

- 이어피스 옵션: 이어몰드, 이어팁

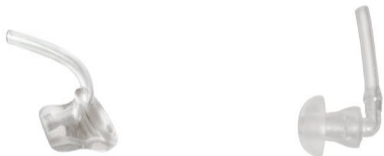

② 슬림튜브(SlimTube 3.0)

- 일반적인 귀걸이형 튜브보다 얇아 눈에 덜 띄지만 출력이 낮음
- 길이 : 0,1,2,3

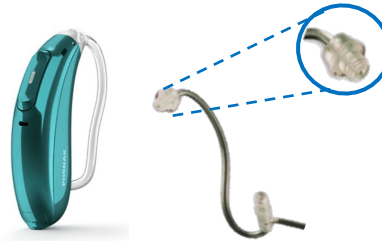

- 이어피스 옵션: RIC 돔, 슬림팁



③ 파워 슬림튜브(Power SlimTube 3.0)

- 슬림튜브(②)와 이어몰드가 결합된 형태
- 길이 : 00,0,1,2,3



- 이어피스 옵션: 이어몰드

